Dale® ACE* Connector® con Conexiones Heredadas

REF 475

(*Access Controller for Enteral, Controlador de acceso enteral)

Funciona con sistemas entéricos abiertos o cerrados

El conector ***ACE Connector*** está indicado para controlar el flujo de líquidos dentro y fuera de sondas mientras se administra fórmula de alimentación enteral, irrigación con jeringa y medicamentos líquidos, sin interrumpir los tubos de administración, hasta 30 días. Este sistema cerrado protege al profesional sanitario de la exposición accidental a los líquidos gástricos de los pacientes.


Instrucciones de Uso

1 ***Procedimiento de alimentación***

El *ACE Connector* reemplaza los adaptadores para la sonda de gastrostomía endoscópica percutánea.

a. Acoplar el extremo del conector del catéter a la sonda de alimentación.
b. Insertar el juego de alimentación o la punta de la jeringa de bolo en el adaptador flexible blanco.
c. Poner la perilla en la posición ON para administrar la fórmula de alimentación.
d. Poner la perilla en la posición OFF al terminar la alimentación, y quitar el juego de alimentación del adaptador flexible blanco.


Si se utiliza el ***Ace Connector*** para alimentación nasogástrica, acoplar el extremo del conector directamente en la sonda nasogástrica. Seguir las instrucciones b-d que figuran arriba.

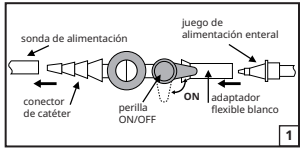

2 ***Jeringa de irrigación con punta de catéter de 50-60 ml/procedimiento de administración de medicamentos líquidos***

Como medida de seguridad, el *ACE Connector* acepta únicamente jeringas de irrigación con punta de catéter y no acepta jeringas ni juegos de administración de tipo Luer.


a. Poner la perilla en la posición OFF.
b. Mientras sujeta firmemente el ***Ace Connector***, ***presionar y girar*** la jeringa con punta de catéter de 50-60ml en el puerto para jeringa autosellante hasta que quede perfectamente encajada.
c. Dispensar líquido o medicamento en el ***ACE Connector***.
d. Retirar la jeringa. El puerto de autosellado se cerrará automáticamente.
e. Irrigar con agua tibia a través del puerto de jeringa de autosellado.

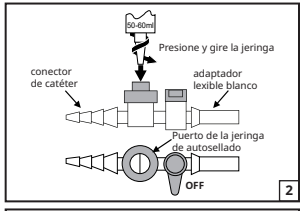

3 ***Procedimiento de drenaje y aspiración***

El *ACE Connector* reemplaza los conectores 5 en 1 usados con sondas Salem, Levin y gástricas.

a. Quitar el conector 5 en 1 que haya en la sonda del paciente.
b. Acoplar el extremo del conector del catéter a la sonda del paciente.
c. Quitar el adaptador flexible blanco y acoplar el tubo de aspiración directamente al ***ACE Connector***.
d. Poner la perilla en la posición ON para permitir la aspiración o el drenaje.
e. Poner la perilla en la posición OFF y quitar el tubo de aspiración si se desea.

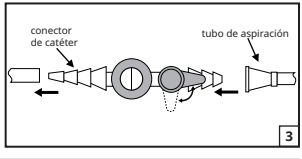

Para uso en un único paciente / Almacenar en un lugar fresco y seco

Las leyes federales de los EE. UU. limitan la venta de este dispositivo a médicos o por orden facultativa.

- Para permitir que el paciente deambule, poner la perilla en la posición OFF y desconectar el juego de alimentación o el tubo de aspiración. El paciente puede deambular a su gusto. Para reanudar la alimentación y el drenaje basta con repetir los procedimientos descritos.
- Cambiar cada vez que sea necesario. No se recomienda el uso durante más de 30 días.
- En el caso de que el dispositivo no funcione de acuerdo con las instrucciones o según lo esperado, irrigar bien el ***ACE Connector*** siguiendo las instrucciones y verificar la configuración de la administración enteral. Si el problema persiste, usar un ***ACE Connector*** y un conjunto de administración enteral nuevos, según se requiera, siguiendo el protocolo de "manejo de alimentación enteral" del hospital.
- ***ACE Connector*** proporciona principalmente un método de administración de alimentación enteral para pacientes. Seguir el protocolo de manejo de alimentación enteral del hospital para administrar medicamentos.

Los productos médicos Dale están disponibles a través de su distribuidor favorito de productos médicos y hospitalarios.

Patente www.dalemed.com/patents

Información para Pedidos

475 Dale ACE Connector
Envasado individualmente.
A la venta en cajas de 50 unidades.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP

Fabricado sin látex de goma natural

Hecho en China

Dale y ACE Connector son marcas registradas de Dale Medical Products, Inc. en EE.UU., la UE y el Reino Unido.
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products