# Dale® ACE* Connector® med Äldre Anslutningar

REF 475

**(*Access Controller for Enteral, enhet för styrning av enteral åtkomst)**

**Fungerar med öppna eller stängda enteralsystem**

***ACE Connector*** är indicerad för att i upp till 30 dagar styra vätskeflödet in i och ut ur slangar för medicinskt bruk, för tillförsel av sondnäring, spolning med hjälp av spruta och tillförsel av flytande läkemedel, utan att vätsketillförselsslangarna behöver tas isär. Det här stängda systemet skyddar vårdarbetaren från oavsiktlig exponering för patientens magsäcksinnehåll.


## Bruksanvisning

**1** ***Matning***

***ACE Connector*** **ersätter enterala matningsadaptrar för PEG-sonder.**

a. Anslut kateterkopplingsänden till matningssonden.
b. För in matningssetets eller bolussprutans spets i den vita, flexibla adaptern.
c. Vrid handtaget till läget ON (PÅ) för att tillföra sondnäring.
d. Vrid handtaget till läget OFF (AV) när matningen är avslutad och avlägsna matningssetet från den vita, flexibla adaptern.

När ***ACE Connector*** används för NG-matning ska kateterkopplingsänden anslutas direkt till NG-slangen. Följ punkt b-d ovan.

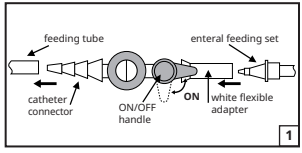



**2** ***50-60 ml kateterspets Irrigationsspruta/Lavage och flytande medicinering***

***Leveransförfarande***

**Som en säkerhetsfunktion kan *ACE Connector* endast anslutas till spolsprutor med kateterspets och kan inte anslutas till administreringsset eller sprutor med luerfattning.**


a. Vrid handtaget till läget OFF (AV).
b. Medan du håller ett fast tag om ***Ace Connector trycker och vrider du*** sprutan med 50-60 ml kateterspets in i sprutporten med automatisk tätning tills den sitter fast.
c. Dispensera vätska eller läkemedel i ***ACE Connector***.
d. Avlägsna sprutan. Den självtätande sprutporten sluts automatiskt.
e. Spola med varmt vatten genom den självtätande sprutporten.

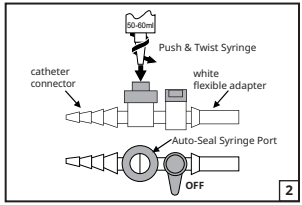


**3** ***Tömning och sugning***

***ACE Connector*** **ersätter 5-i-1-kopplingar som används med Salem-, Levin- och ventrikelsonder.**

a. Ta bort 5-i-1-kopplingen från patientsonden, om sådan koppling är ansluten.
b. Anslut kateterkopplingsänden till patientsonden.
c. Ta av den vita, flexibla adaptern och anslut sugslangen direkt till ***ACE Connector***.
d. Vrid handtaget till läget ON (PÅ) för att utföra sugning eller tömning.
e. Vrid handtaget till läget OFF (AV) och avlägsna sugslangen om så önskas.

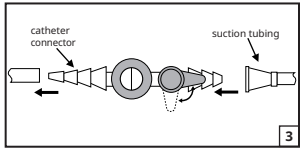


Endast för användning till en patient/förvaras svalt och torrt

Enligt federal (USA) lagstiftning får denna produkt endast säljas av eller på ordination av läkare.

- För uppegående patient vrids handtaget till läget OFF (AV) och matningssetet eller sugslangen avlägsnas. Patienten kan sedan vara uppegående i önskad omfattning. Matning och tömning kan återupptas efter behov genom att ovanstående procedurer upprepas.
- Byt efter behov. Rekommenderas inte för användning i mer än 30 dagar.
- I den händelse att produkten inte fungerar enligt anvisningarna eller som förväntat, ska ***ACE Connector*** spolas noggrant enligt anvisningarna och den enterala tillförselskonfigurationen kontrolleras. Om problemet kvarstår ska ***ACE Connector*** och den enterala tillförselskonfigurationen bytas mot nya sådana, efter behov, i enlighet med sjukhusets rutiner för enteral matning.
- ***ACE Connector*** tillhandahåller huvudsakligen en tillförselsmetod för enteral matning av patienter. Följ sjukhusets eller institutionens rutiner för enteral matning vid tillförsel av läkemedel.

Dale medicinska produkter finns tillgängliga hos försäljare av sjukhus-/medicinska produkter.

Patent www.dalemed.com/patents

## Beställningsinformation

**475** Dale ACE Connector
Individuellt förpackad.
Säljs i kartonger om 50 st.

**Dale Medical Products, Inc.**
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP

**Ej tillverkade med naturgummilatex**

Tillverkas i Kina

Dale & ACE Connector är registrerade varumärken som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA, EU och Storbritannien.
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products