Dale® ACE Connector® พร้อมการเชื่อมต่อแบบดั้งเดิม

REF 475

(*Access Controller f or Enternal [ตัวควบคุมการให้อาหารเหลว])
ใช้ได้กับระบบการให้อาหารทางสายแบบเปิดหรือแบบปิด

ACE Connector มีข้อบ่งชี้ใช้สำหรับการควบคุมของเหลวเข้าและออกจากสายให้อาหารในการให้อาหารเหลว การชำระล้างด้วยหลอดฉีดยา และการให้ยาในรูปของเหลว โดยที่ไม่ต้องเจาะสาย ให้ของเหลวซึ่งใช้ได้เป็นเวลานานถึง 30 วัน ACE* Connector ระบบแบบปิดนี้จะป้องกันเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านสุขภาพจากการสัมผัสกับของเหลวในกระเพาะของผู้ป่วยโดยบังเอิญ


วิธีการใช้

1 ***ขั้นตอนการให้อาหารเหลว***

***ACE Connector* สามารถใช้แทนอะแดปเตอร์ให้อาหารเหลว PEG g-tube**

a. ต่อปลายด้านท่อสวนเข้ากับสายให้อาหาร
b. เสียบชุดให้อาหารหรือปลายหลอดฉีดยาโบลัสเข้าไปในอะแดปเตอร์ยืดหยุ่นสีขาว
c. บิดปุ่มไปยังตำแหน่ง ON เพื่อให้อาหารเหลว
d. บิดปุ่มไปยังตำแหน่ง OFF เมื่อให้อาหารเหลวเสร็จและถอดชุดให้อาหารออกจากอะแดปเตอร์ยืดหยุ่นสีขาว


เมื่อใช้ ***ACE Connector*** กับสายให้อาหาร NG ให้ต่อปลายด้านท่อสวนเข้าโดยตรงกับสายให้อาหาร NG ปฏิบัติตามข้อ b-d ข้างต้นนี้

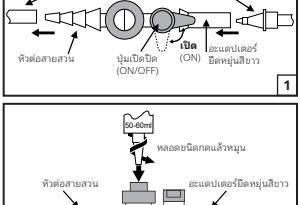

2 ***ขั้นตอนการชำระล้างด้วยหลอดฉีดยา และการให้ยาในรูปของเหลว***

***ACE Connector* มีคุณสมบัติปลอดภัย เนื่องจากเสียบได้เฉพาะหลอดฉีดยาชนิดปลาย เป็นท่อสวน และไม่สามารถเสียบหลอดฉีดยาชนิดปลาย Luer**


a. บิดปุ่มไปยังตำแหน่ง OFF
b. ในขณะที่จีบจับ ***ACE Connector*** เอาใจให้แน่น กดแล้วหมุนหลอดส่วนปลายของสายให้อาหารลงในในช่อง ใส่หลอดชนิดปิดผนึกโดยอัตโนมัติจนกว่าจะแน่นสนิทดี
c. ปล่อยของเหลวหรือยาเข้าไปใน ***ACE Connector***
d. ถอนหลอดฉีดยา ช่องเสียบหลอดฉีดยาจะปิดโดยอัตโนมัติ
e. ล้างด้วยน้ำอุ่นผ่านช่องเสียบหลอดฉีดยา

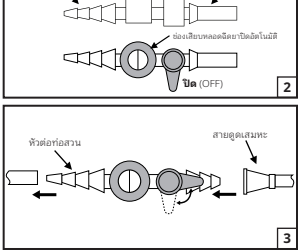

3 ***ขั้นตอนการระบายและการดูดเสมหะ***

***ACE Connector* สามารถใช้แทนคอนเนคเตอร์ 5-in-1 ที่ใช้กับสาย Salem, Levin และสายกระเพาะอาหาร**

a. ถอดคอนเนกเตอร์ 5-in-1 จากสายให้อาหารของผู้ป่วย
b. ต่อปลายด้านท่อสวนเข้ากับสายให้อาหาร
c. ถอดอะแดปเตอร์ยืดหยุ่นสีขาวออกและต่อสายดูดเสมหะเข้ากับ ***ACE Connector*** โดยตรง
d. บิดปุ่มไปยังตำแหน่ง ON เพื่อดูดเสมหะหรือระบาย
e. บิดปุ่มไปยังตำแหน่ง OFF และถอดสายดูดเสมหะ หากต้องการ

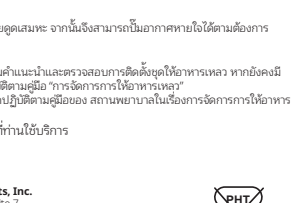

สำหรับผู้ป่วยแบบใช้ครั้งเดียว / เก็บรักษาในที่ที่เย็นและแห้ง
กฎหมายสหรัฐฯ จำกัดว่าอุปกรณ์นี้จะต้องจำหน่ายโดยแพทย์ หรือตามใบสั่งของแพทย์

- ถ้าต้องการปิดอากาศหายใจให้ผู้ป่วย ให้บิดปุ่มไปยังตำแหน่ง OFF และถอดชุดให้อาหารหรือสายดูดเสมหะ จากนั้นจึงสามารถปิดอากาศหายใจได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำๆ เพื่อให้อาหารและดูดเสมหะต่อได้ตามต้องการ
- เปลี่ยนชุดใหม่ตามความจำเป็น ไม่แนะนำให้ใช้เกินกว่า 30 วัน
- ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่ทำงานตามคำแนะนำที่ให้ไว้ หรือตามที่คาดไว้ ให้สาง ***ACE Connector*** ตามคำแนะนำและตรวจสอบการติดตั้งชุดให้อาหารเหลว หากยังคงมีปัญหา ให้เปลี่ยน ***ACE Connector*** อันใหม่และติดตั้ง ชุดให้อาหารเหลวตามที่กำหนด โดยปฏิบัติตามคู่มือ "การจัดการการให้อาหารเหลว"
- อุปกรณ์ ***ACE Connector*** เป็นวิธีเบื้องต้นในการให้อาหารเหลวแก่ผู้ป่วย สำหรับการให้ยา โปรดปฏิบัติตามคู่มือของ สถานพยาบาลในเรื่องการจัดการการให้อาหารเหลว ท่านสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ Dale มีจำหน่ายที่โรงพยาบาล/ตัวแทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่ที่ท่านใช้บริการ
สิทธิบัตร www.dalemed.com/patents

ข้อมูลการสั่งซื้อ

475 Dale ACE Connector
จัดบรรจุแยกชิ้นกัน
จำหน่ายเป็นกล่อง กล่องละ 50 ชิ้น

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
โทรศัพท์: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP
ไม่ได้ผลิตด้วยยางลาเท็กซ์ธรรมชาติ

ผลิตในประเทศจีน

Dale & ACE Connector เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products
942183-ART_REV_N