Eski Bağlantılarla Dale® ACE* Connector®

REF 475

(*Access Controller for Enteral - *Enteral için Erişim Kontrolörü)

Açık veya kapalı enteral sistemlerle çalışır.

ACE Connector sıvı iletim hatlarını ayırmadan enteral formüller, şırınga irigasyonu ve sıvı ilaçların iletimini sağlarken tıbbi tüpler içine ve dışına sıvı akışını 30 güne kadar kontrol etmek üzere endikedir. Bu kapalı sistem sağlık çalışanını hastaların mide sıvılarına kazara maruz kalmaktan korur.


Kullanma Talimati

1 ***Besleme İşlemi***

ACE Connector **PEG g-tüp enteral besleme adaptörlerinin yerini alır.**

a. Kateter konektör ucunu besleme tüpüne takın.
b. Besleme seti veya bolus şırınga ucunu beyaz esnek adaptöre yerleştirin.
c. Besleme formülünü iletmek için sapı AÇIK pozisyonuna çevirin.
d. Besleme tamamlandığında sapı KAPALI pozisyona çevirin ve besleme setini beyaz esnek adaptörden çıkarın.


Ace Connector NG besleme için kullanıldığında kateter konektörü ucunu doğrudan NG tüpe takın. Yukarıda basamak b-d'yi izleyin.

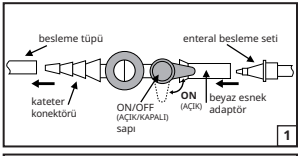

2 ***50-60ml Kateter Ucu İrrigasyon Şırıngası/Lavaj ve Sıvı İlaç Verme Prosedürü***

Bir güvenlik önlemi olarak *ACE Connector* sadece kateter ucu irigasyon şırıngalarını kabul eder ve Luer uçlu uygulama setleri veya şırıngaları kabul etmez.


a. Sapı KAPALI pozisyona çevirin.
b. ***Ace Connector*** cihazını sıkıca tutarken 50-60ml kateter uçlu şırıngayı Otomatik Kapanan Şırınga Portu'na sıkıca oturana dek ***İttirin ve Döndürün***.
c. Sıvı veya ilacı ***ACE Connector*** içine verin.
d. Şırıngayı çıkarın. Auto-Seal Şırınga Portu otomatik olarak kapanır
e. Auto Seal Şırınga Portu içinden ilik su verin.

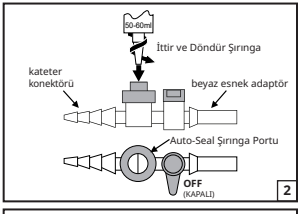

3 ***Drenaj ve Emme İşlemi***

ACE Connector **Salem, Levin ve mide tüpleriyle kullanılan 5'i 1 yerde konektörlerin yerini alır.**

a. Hasta tüpünden varsa 5'i 1 yerde konektörü çıkarın.
b. Kateter konektör ucunu hasta tüpüne takın.
c. Beyaz esnek adaptörü çıkarın ve emme tüpünü doğrudan ***ACE Connector***'a takın.
d. Emme veya drenaj için sapı AÇIK pozisyona çevirin.
e. Emme tüpünü çıkarmak için sapı KAPALI pozisyona çevirin ve isterseniz emme tüpünü çıkarın.

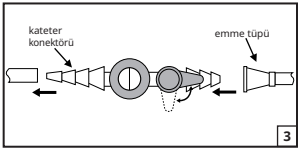

Tek hastada kullanılmak üzeredir / Serin ve kuru bir yerde saklayın

A.B.D. federal kanunlarına göre bu cihaz sadece bir doktor tarafından veya emriyle satılabilir.

- Hastayı hareket ettirmek için sapı KAPALI pozisyona getirin ve besleme seti veya emme tüpünü ayırın. Hasta sonra istenen şekilde hareket edebilir. Besleme ve drenaj yukarıdaki işlemler tekrarlanarak gerektiği şekilde devam ettirilebilir.
- Gerektiği şekilde değiştirin. 30 günden fazla kullanılması önerilmez.
- Cihaz talimata göre veya beklendiği şekilde çalışmıyorsa talimatı izleyerek ***ACE Connector*** içinden iyice su geçirin ve enteral iletim sistemini kontrol edin. Problem devam ederse, gerektiği şekilde ***ACE Connector*** ve enteral iletim sistemini hastanenin "enteral besleme yönetimi" protokolüne göre yenisiyle değiştirin.
- ***ACE Connector*** temel olarak enteral besleme için bir iletim yöntemi sağlar. İlaçları iletirken hastane veya tesisin enteral besleme yönetimi protokolünü izleyin.

Dale tıbbi ürünleri tercih ettiğiniz hastane/tıbbi malzeme satıcısından elde edilebilir.

Patent www.dalemed.com/patents

Sipariş Bilgisi

475 Dale ACE Connector
Ayrı olarak paketlenmiştir
50 adetlik kutularda satılır.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP

Doğal kauçuk lateksle yapılmamıştır

Çin malı

Dale & ACE Connector, Dale Medical Products, Inc. şirketinin ABD, AB ve İngiltere'deki tescilli ticari markalarıdır.
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products