Konektor Dale® ACE* Connector® se systémem propojení ENFit® kompatibilním s normou ISO 80369-3 **REF 485**

(*Ovládání přístupu pro enterální podávání)
Funguje s otevřenými i uzavřenými enterálními systémy, které vyhovují normě ISO 80369-3


Návod k Použití

1 ***K podávání výživy lze použít trubice pro podávání výživy typu ENFit s malým vnitřním průměrem, včetně trubic Dobbhoff, PEG, PEJ, BRT, Gastrostomy, G/J, sad pro podávání výživy a zvláštních trubic Salem Sump™ vybavených konektory ENFit.***

Při podávání enterální výživy přes ***ACE Connector*** připojte zásuvkový distální port ENFit konektoru ACE k zástrčkovému konektoru ENFit enterální trubice. **Postupujte podle níže uvedených pokynů a–d.**

a. Připojte zásuvkový port ENFit (distální stranou) konektoru ACE k zástrčkovému konektoru ENFit na trubici pro podávání výživy pacientovi.
b. Přiložte a otočením připojte zásuvkový konektor ENFit sady pro podávání enterální výživy k zástrčkovému portu ENFit (proximální stranou) konektoru ACE.
c. Otočením rukojeti do polohy ON (ZAPNUTO) zahajte dodávání výživy.
d. Jakmile je podávání výživy dokončeno, otočte rukojeť do polohy OFF (VYPNUTO) a odšroubujte sadu pro podávání výživy od konektoru ACE.


*Bezbalonkové trubice PEG mohou vyžadovat použití bílého přechodového konektoru ENFit 80369-3 nebo univerzálního adaptéru (k dispozici samostatně).

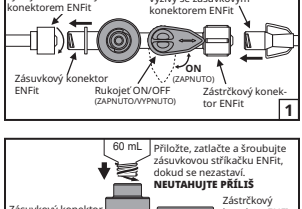

2 ***60ml irigační stříkačka s hrotem ENFit / postup podávání tekutých léků. Porty ENFit mohou pojmout jakoukoli velikost stříkačky ENFit se středovým hrotem s plným závitem.***

Z bezpečnostních důvodů nový *ACE Connector* pasuje pouze na irigační stříkačky s hrotem ENFit a nelze s ním použít stříkačky zakončené katétrem, stříkačkami či sadami pro podávání s hrotem Luer ani hypodermické jehly.

a. Otočte rukojeť do polohy OFF (VYPNUTO).
b. Držte pevně ***ACE Connector***, přiložte, zatlačte a zašroubujte stříkačku ENFit se zásuvkovým hrotem do samotěsnicího injekčního portu, dokud se nezastaví. - **NEUTAHUJTE PŘÍLIŠ!** Důrazně doporučujeme před použitím i po něm proplachnout.
c. Dodejte tekutinu nebo léčivo do samotěsnicího injekčního portu ***ACE Connector***, případně odstraňte zbytky žaludečních šťáv.
d. Odeberte stříkačku. Samotěsnicí injekční port se zástrčkovým konektorem ENFit se automaticky utěsní.
e. Ze samotěsnicího injekčního portu vypláchněte vodou veškeré zbytky léčiv.
f. Otočte rukojeť do polohy ON (ZAPNUTO).

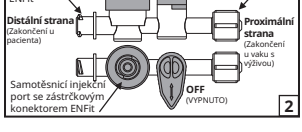

Tento výrobek je kompatibilní s přechodovým konektorem ENFit a s nálevkovými konektory ENFit.

3 ***Postup drenáže a odsávání***

Konektor ACE 485 Enteral Connector lze využívat k odsávání a drenáži v kombinaci se zvlášť vybavenými trubicemi ENFit Salem Sump a odsávacími trubicemi se zvláštním adaptérem ENFit.

4 ***MR kompatibita*** MR ***Neklinické testování ukázalo, že konektor Dale Medical 485 ENFit ACE CONNECTOR je kompatibilní s vyšetřením magnetickou rezonancí. Pacient s tímto systémem může být bezpečně snímkován v systému MR ihned po umístění, a to za následujících podmínek:***

- Statické magnetické pole pouze 1,5 Tesla a 3 Tesla.
- Maximální prostorový gradient pole 3000 Gauss/cm nebo méně.

K použití pouze u jednoho pacienta / Uchovejte v suchu a chladu
Federální zákony (USA) omezují prodej tohoto zařízení na lékaře nebo na objednávku lékaře.

- Chcete-li pacienta přemístit, otočte rukojeť do polohy OFF (VYPNUTO) a odpojte sadu pro podávání výživy. Poté je možné pacienta přemístit podle potřeby. Podávání výživy lze podle potřeby obnovit opakováním výše uvedených postupů. ***ACE Connector*** zůstává součástí katétru podle obecně přijímaných zdravotnických norem.
- Vyměňujte podle potřeby podle léčebného protokolu. Nedoporučuje se používat déle než 30 dnů.
- Pokud zařízení nefunguje podle pokynů nebo očekávání, proplachněte důkladně ***ACE Connector*** podle návodu a zkontrolujte nastavení podávání enterální výživy. Pokud problém přetrvává, vyměňte podle potřeby za nový ***ACE Connector*** a sadu pro podávání enterální výživy. Dodržujte léčebný protokol pro postup podávání enterální výživy.
- ***ACE Connector*** primárně poskytuje metodu podávání enterální výživy pacientovi. Při podávání léčivých přípravků postupujte podle léčebného protokolu pro postupy podávání enterální výživy.

Zdravotnické výrobky společnosti Dale jsou dostupné u dodavatelů zdravotnických prostředků.
Patent www.dalemed.com/patents

Informace k Objednávce

485 Dale ACE Connector
Baleno jednotlivě.
Prodáváno v krabicích po 50 kusech

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP
Vyrobeno bez použití latexu z přírodní pryže

Vyrobeno v Číně

Dale & ACE Connector jsou registrované ochranné známky společnosti Dale Medical Products, Inc. v USA, EU a Velké Británii.
ENFit je registrovaná ochranná známka společnosti GEDSA používaná s jejím svolením.
Salem Sump je ochranná známka společnosti Cardinal Health, Inc.
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products
942253-ART_REV_G