
Dale® ACE* Connector® med ISO 80369-3-kompatibelt ENFit® tilslutnings

REF 485

(*Styremekanisme til enteral adgang)

Virker med åbne eller lukkede enterale systemer, der er i overensstemmelse med ISO 80369-3.

Brugsanvisning

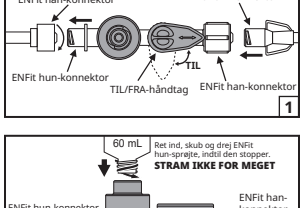


1 ***Ernæringsproceduren kan bruges med ENFit-ernæringssonder med lille åbning, herunder Dobbhoff, PEG, PEJ, BRT gastrostomi, G/J, administrationssæt til ernæring og især Salem Sump™ sonder, der er udstyret med ENFit-konnektorer.***

Hvis ***ACE Connector*** bruges til enteral ernæring, skal ACE's ENFit hun-konnektors distale port tilsluttes ernæringssondens ENFit han-konnektor.

Følg anvisningerne i a-d nedenfor.

a. Slut ACE's ENFit hun-port (distale side) til ENFit han-konnektoren på patientens ernæringssonde.
b. Skru ernæringssættets ENFit hun-konnektor lige på ***ACE Connectors*** ENFit han-port (proksimale side).
c. Drej håndtaget over på TIL for at tilføre ernæring.
d. Drej håndtaget over på FRA, når ernæringstilførslen er færdig, og skru ernæringssættet af ***ACE Connector***.

*PEG-sonder uden ballon kan nødvendiggøre brug af en hvid 80369-3 ENFit overgangskonnektor eller en universaladapter, som ikke leveres sammen med ***ACE Connector***.

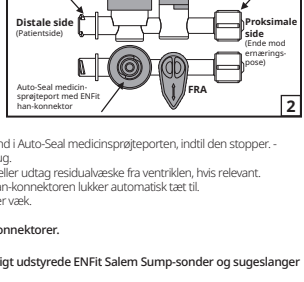

2 ***60mL ENFit tip irrigationssprøjte/Lavage og procedure til levering af flydende medicin. ENFit-porte kan rumme alle størrelser ENFit-sprøjter med centertip og fuldt gevind.***

Som sikkerhedsforanstaltning kan den nye *ACE Connector* kun passe sammen med enterale skyllesprøjter med ENFit-spids og ikke sammen med sprøjter med kateterspids, sprøjter med Luer-spids, administrationssæt med Luer-spids eller subkutane kanyler.

a. Drej håndtaget over på FRA.
b. Hold fast på ***ACE Connector*** og tryk og drej sprøjten med ENFit hun-spidsen lige ind i Auto-Seal medicinsprøjteporten, indtil den stopper. - **STRAM IKKE FOR MEGET!** Det anbefales kraftigt at gennemskylle før og efter brug.
c. Tilfør væske eller medicin gennem ***ACE Connector*** Auto-Seal medicinsprøjteport, eller udtag residualvæske fra ventrikler, hvis relevant.
d. Fjern sprøjten. Grænsefladen mellem Auto-Seal medicinsprøjteporten og ENFit han-konnektoren lukker automatisk tæt til.
e. Skyl med vand gennem Auto-Seal medicinsprøjteporten, indtil alle medicinrester er væk.
f. Drej håndtaget over på TIL.

Produktet er kompatibelt med ENFit overgangstrinkonnektor og ENFit tragtkonnektoren.

3 ***Drænage og udsugningsprocedure***

ACE 485 Enteral Connector kan anvendes til udsugning og drænage med særligt udstyrede ENFit Salem Sump-sonder og sugeslanger med en særlig ENFit-adapter.

4 ***MR Conditional*** ***Ikke-klinisk afprøvning har påvist, at Dale Medical 485 ENFit ACE CONNECTOR kan MR-scannes under visse betingelser. Patienter med dette produkt kan MR-scannes sikkert umiddelbart efter anlæggelse under følgende betingelser:***

- Kun statisk magnetfelt på 1,5 Tesla og 3 Tesla.
- Spatial magnetfeltstyrke for gradient på maks. 3000 Gauss/cm.

Til brug til en enkelt patient / Opbevares køligt og tørt

Ifølge amerikansk lovgivning (USA) må dette produkt kun sælges af en læge eller på en læges ordination.

- Patienten ambuleres ved at dreje håndtaget over på FRA og frakoble ernæringssættet. Patienten kan derefter bevæge sig frit. Ernæring kan genoptages efter behov ved at gentage ovenstående fremgangsmåde. ***ACE Connector*** bliver siddende på kateteret i overensstemmelse med godkendt, medicinsk praksis.
- Udskiftes efter behov ifølge hospitalets protokol. Anvendelse i mere end 30 dage anbefales ikke.
- Hvis ***ACE Connector*** ikke yder som forventet eller ifølge anvisningerne, skal den gennemskylles grundigt ifølge anvisningerne, og tilslutningen af ernæringssonden skal efterses. Hvis problemet vedvarer, skal ***ACE Connector*** og ernæringssættet udskiftes med nye dele efter behov og ifølge hospitalets protokol for enteral ernæring.
- ***ACE Connector*** er primært en metode til enteral ernæring af patienter. Ved administration af medicin skal hospitalets eller facilitetens protokol for enteral ernæring følges.

Medicinske produkter fra Dale kan fås hos forhandlere af hospitalsudstyr/medicinsk udstyr.

Patent www.dalemed.com/patents

Bestilling

485 Dale ACE Connector
Individuelt pakket.
Sælges i æsker med 50 stk.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP

Fremstillet uden naturgummilatex

Fremstillet i Kina

Dale & ACE Connector er registrerede varemærker tilhørende Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannien.
ENFit er et registreret varemærke tilhørende GEDSA og anvendes med deres tilladelse.
Salem Sump er et varemærke tilhørende Cardinal Health, Inc.
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products