Dale® ACE* Connector® -liitin, jossa on ISO 80369-3 -yhteensopiva ENFit®-liitäntäjärjestelmä **REF 485**

(*Access Controller for Enteral)

Toimii ISO 80369-3 -yhteensopivien avointen tai suljettujen enteraalisten järjestelmien kanssa


Käyttöohjeet

1 Ruokinnassa voidaan käyttää ENFit-tyyppisiä pienireikäisiä ruokintaletkuja, kuten Dobbhoff-, PEG-, PEJ-, BRT-gastrostomia-, G/J-letkuja, ruokintavälineistöjä ja Salem Sump™ -erikoisletkuja, joissa on ENFit-liittimet.

Kun ***ACE Connector*** -liitintä käytetään enteraaliseen ruokintaan, ACE:n naaraspuolinen ENFit-distaaliportti tulee liittää enteraliletkun koiraspuoliseen ENFit-liittimeen. Noudata alla olevia käyttöohjeita a–d.

a. Liitä ACE:n naaraspuolinen ENFit-portti (distaalipuoli) potilaan ruokintaletkun koiraspuoliseen ENFit-liittimeen.
b. Kohdista ja kierrä enteraalisen ruokintasetin naaraspuolinen ENFit-liitin ***ACE Connector*** -liittimen koiraspuoliseen ENFit-porttiin (proksimaalipuoli).
c. Käännä kahva AUKI-asentoon, kun haluat käynnistää ruokinnan.
d. Käännä kahva KIINNI-asentoon, kun potilas on ruokittu, ja kierrä ruokintasetti irti ***ACE Connector*** -liittimestä.


*Pallottomien PEG-letkujen kanssa on ehkä käytettävä valkoista 80369-3 ENFit -siirtoliitintä tai yleissovitinta. Niitä ei toimiteta ***ACE Connector*** -liittimen mukana.

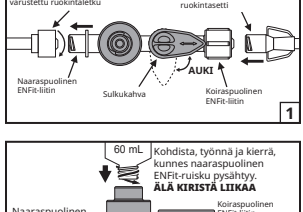

2 60 ml:n ENFit-kärkikastelu ruisku/Lavage ja nestemäisen lääkkeen antomenettely. ENFit-portteihin mahtuu minkä tahansa kokoisia ENFit-keskikärkiruiskuja, joissa on täydet kierteet.

Turvaominaisuutena uuden ***ACE Connector*** -liittimen kärkeen sopivat vain ENFit-kärkiset enteraaliset huuhteluruiskut. Siihen eivät sovi katetrikärkiset ruiskut, luer-kärkiset ruiskut, luer-kärkiset annosteluletkut tai injektioneulat.

a. Käännä kahva KIINNI-asentoon.
b. Pidä ***ACE Connector*** -liittimestä tukevasti kiinni ja kohdista naaraspuolinen ENFit-ruisku Auto-Seal-ruiskulääkeportin kanssa ja työnnä ruisku porttiin samalla kiertäen, kunnes ruisku pysähtyy. - **ÄLÄ KIRISTÄ LIIKAA!** Huuhteleminen on erittäin suositeltavaa ennen käyttöä ja käytön jälkeen.
c. Annostele neste tai lääke ***ACE Connector*** -liittimen Auto-Seal-ruiskulääkeporttiin tai vedä haluttaessa pois mahansisällön jäännökset.
d. Irrota ruisku. Koiraspuolisella ENFit-liittimellä varustettu Auto-Seal-ruiskulääkeportti sulkeutuu automaattisesti.
e. Huuhtele vedellä Auto-Seal-ruiskulääkeportin läpi, kunnes puhdas.
f. Käännä kahva AUKI-asentoon.

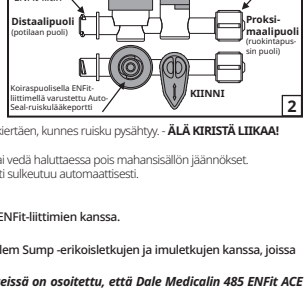

Tämä tuote on yhteensopiva porrastetun ENFit-liittimen ja suppilotyyppisten ENFit-liittimien kanssa.

3 Dreenaus ja imu

Enteraalista ACE 485 -liitintä voidaan käyttää imuun ja dreenaukseen ENFit Salem Sump -erikoisletkujen ja imuletkujen kanssa, joissa on ENFit-erikoissovitin.

4 Ehdollisesti turvallinen magneettikuvauksessa MR ***Ei-kliinisissä testeissä on osoitettu, että Dale Medicalin 485 ENFit ACE CONNECTOR -liitin on ehdollisesti turvallinen magneettikuvauksessa. Potilasta, jolla on tämä laite, voidaan kuvata turvallisesti magneettikuvausjärjestelmässä välittömästi asennuksen jälkeen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:***

- Staattinen magneettikenttä on vain 1,5 ja 3 teslaa.
- Spatiaalisen gradienttikentän voimakkuus on enintään 3 000 gaussia/cm.

Potilaskohtainen / säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa

Yhdysvaltain lain mukaan tämän tuotteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

- Jos potilaan tarvitsee kävellä, käännä kahva KIINNI-asentoon ja irrota ruokintasetti. Potilas voi kävellä tämän jälkeen tarpeen mukaan. Ruokintaa voidaan tarvittaessa jatkaa edellä kuvatulla tavalla. ***ACE Connector*** -liitin pysyy osana katetria hyväksyttyjen lääketieteellisten standardien mukaisesti.
- Vaihda tarvittaessa sairaalan käytännön mukaisesti. Ei suositella yli 30 päivää kestävään käyttöön.
- Jos laite ei toimi ohjeiden tai odotusten mukaisesti, huuhtele ***ACE Connector*** -liitin huolellisesti ohjeiden mukaan ja tarkasta, että enteraalinen ruokinta on asetettu oikein. Jos ongelma jatkuu, vaihda tarpeen mukaan tilalle uusi ***ACE Connector*** -liitin ja enteraalinen ruokintasetti sairaalan enteraalisen ruokinnan ohjeita noudattaen.
- ***ACE Connector*** -liittimen pääasiallinen tehtävä on tarjota antomenetelmä potilaan enteraalista ruokintaa varten. Lääkkeitä annettaessa on noudatettava sairaalan tai laitoksen enteraalisen ruokinnan ohjeita.

Dalen lääketieteellisiä tuotteita on saatavana lääketieteellisten ja sairaalatarvikkeiden myyjiltä.

Patentti www.dalemed.com/patents

Tilaustiedot

485 Dale ACE Connector
Yksittäispakattu.
Myydään 50 kappaleen laatikoissa.

Valmistettu Kiinassa

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP

Ei ole valmistettu luonnonkumilateksista

Dale ja ACE Connector ovat Dale Medical Products, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
ENFit on GEDSA:n rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään heidän luvallaan.
Salem Sump on Cardinal Health, Inc:n tavaramerkki.
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products