Dale® ACE* Connector® με σύστημα σύνδεσης ENFit® συμβατό με ISO 80369-3

REF 485

(*Ελεγκτής πρόσβασης για εντερικά συστήματα)

Λειτουργεί με ανοικτά ή κλειστά εντερικά συστήματα που είναι συμβατά με το ISO 80369-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1 ***Η διαδικασία σίτισης μπορεί να πραγματοποιηθεί με σωλήνες σίτισης μικρού διαμετρήματος τύπου ENFit συμπεριλαμβανομένων σωλήνων Dobbhoff, διαδερμικής ενδοσκοπικής γαστροστομίας (PEG), διαδερμικής ενδοσκοπικής νηστιδοστομίας (PEJ), γαστροστομίας αντικατάστασης με μπαλόνι, γαστρονηστιδικών σωλήνων, σετ χορήγησης σίτισης και ειδικών σωλήνων Salem Sump™ που διαθέτουν συνδέσμους ENFit.***

Όταν ο σύνδεσμος ***ACE Connector*** χρησιμοποιείται για εντερική σίτιση, συνδέστε το θηλυκό περιφερικό άκρο ENFit του ACE με το αρσενικό άκρο του συνδέσμου ENFit Connector ενός εντερικού σωλήνα. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες α - δ.

a. Συνδέστε το θηλυκό άκρο του ENFit (περιφερική πλευρά) του ACE με τον αρσενικό σύνδεσμο ENFit του σωλήνα σίτισης ασθενών.
b. Ευθυγραμμίστε & στρέψτε το σετ εντερικής χορήγησης σίτισης με το θηλυκό σύνδεσμο ENFit με το αρσενικό άκρο ENFit (εγγύς πλευρά) του συνδέσμου ***ACE Connector***.
c. Γυρίστε λαβή στη θέση ΟΝ για να χορηγήσετε το σκεύασμα εντερικής σίτισης.
d. Στρέψτε τη λαβή στη θέση ΟΦΦ όταν ολοκληρωθεί η σίτιση και αφαιρέστε το σετ σίτισης από το σύνδεσμο ***ACE Connector*** εξβιδώνοντας το.

*Οι σωλήνες χωρίς μπαλόνι PEG μπορεί να απαιτεί τη χρήση ενός λευκού μεταβατικού συνδέσμου 80369-3 ENFit ή προσαρμογέα γενικής χρήσης, δεν παρέχεται με το σύνδεσμο ***ACE Connector***.

Σύριγγα άρδευσης 60mL ENFit tip/διαδικασία χορήγησης υγρών φαρμάκων. Οι σύριγγες ENFit μπορούν να φιλοξενήσουν σύριγγες ENFit οποιουδήποτε μεγέθους με κεντρικό άκρο και πλήρες σπείρωμα.

Ως χαρακτηριστικό ασφαλείας, ο καινούριος σύνδεσμος ***ACE Connector*** θα δέχεται μόνο άκρα σύριγγας εντερικού καταλονισμού ENFit και δεν θα δέχεται σύριγγες με άκρα καθετήρα, σύριγγες με άκρα Luer, σετ χορήγησης με άκρα Luer διοίκηση, ή υποδόρες βελόνες.

a. Στρέψτε τη λαβή στη θέση ΟΦΦ.
b. Ενώ κρατάτε το ***ACE Connector*** σταθερά, Ευθυγραμμίστε, Πιέστε & Περιστρέψτε το θηλυκό άκρο της σύριγγας ENFit στην υποδοχή χορήγησης φαρμάκων Auto-Seal μέχρι να σταματήσει. - **ΜΗΝ ΣΦΙΓΓΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ!** Συνιστάται ιδιαίτερα να ξεπλύνετε πριν και μετά τη χρήση.
c. Χορηγήστε το υγρό ή τη φαρμακευτική αγωγή στην υποδοχή χορήγησης φαρμάκων Auto-Seal του συνδέσμου ACE ή αναρροφήστε τα γαστρικά υπολείμματα αν προτιμάτε.
d. Αφαιρέστε τη σύριγγα. Η υποδοχή χορήγησης φαρμάκων Auto-Seal με αρσενική διεπαφή του συνδέσμου ENFit θα σφραγίσει αυτόματα.
e. Ξεπλύνετε με νερό μέσω της υποδοχής χορήγησης φαρμάκων Auto-Seal μέχρι να μην υπάρχει υπόλειμμα φαρμάκου.
f. Γυρίστε λαβή στη θέση ΟΝ.


Αυτό το προϊόν είναι συμβατό με κλιμακωτό σύνδεσμο μετάβασης ENFit και κωνικούς συνδέσμους ENFit.

3 ***Διαδικασία παροχέτευσης και αναρρόφησης***

Ο εντερικός σύνδεσμος ACE 485 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναρρόφηση και παροχέτευση σε συνδυασμό με σωλήνες Salem Sump ειδικά εξοπλισμένους με ENFit και σωλήνες αναρρόφησης με ειδικό προσαρμογέα ENFit.

4 ***MR Conditional*** *Μη κλινικές δοκιμές απέδειξαν ότι ο σύνδεσμος Dale Medical 485 ENFit ACE CONNECTOR είναι MR Conditional. Ένας ασθενής με αυτή τη συσκευή μπορεί να εκτεθεί σε MR μαγνητική τομογραφία αμέσως μετά την τοποθέτηση της υπό τους ακόλουθους όρους:*

- Στατικό μαγνητικό πεδίο 1,5 – Tesla και 3-Tesla, μόνο.
- Η μέγιστη χωρική βαθμίδα του μαγνητικού πεδίου του 3000 Gauss / cm ή λιγότερο.

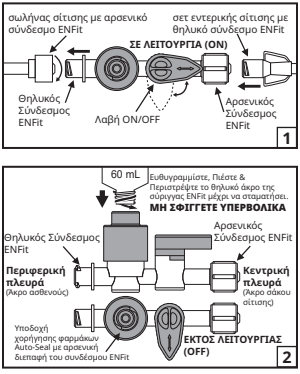

Για χρήση σε ένα μόνον ασθενή / Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό χώρο

Η Ομοσπονδιακή Νομοθεσία (Η.Π.Α.) επιτρέπει την πώληση του οργάνου αυτού μόνο από ιατρό ή με εντολή ιατρού.

- Για να περπατήσει ο ασθενής, γυρίστε λαβή στη θέση ΟΦΦ και αποσυνδέστε το σετ σίτισης. Ασθενής μπορεί στη συνέχεια να περπατά όπως θέλει. Η σίτιση μπορεί να συνεχιστεί όταν χρειαστεί επαναλαμβάνοντας τις παραπάνω διαδικασίες. Ο σύνδεσμος ***ACE Connector*** παραμένει ως μέρος του καθετήρα σύμφωνα με αποδεκτά ιατρικά πρότυπα.
- Αλλάξτε όταν χρειάζεται, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του νοσοκομείου. Δεν συνιστάται για χρήση πάνω από 30 ημέρες.
- Σε περίπτωση που η συσκευή δεν συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις οδηγίες ή όπως πρέπει, ξεπλύνετε καλά το Σύνδεσμο ***ACE Connector*** σύμφωνα με τις οδηγίες και ελέγξτε τη διαμόρφωση εντερικής χορήγησης. Εάν το πρόβλημα συνεχίσει να υφίσταται, αντικαταστήστε το με ένα καινούριο σύνδεσμο ***ACE Connector*** και σετ εντερικής χορήγησης, όπως απαιτείται, ακολουθώντας το νοσοκομειακό πρωτόκολλο «διαχείρισης εντερικής σίτισης».
- Ο σύνδεσμος ***ACE Connector*** παρέχει κατά κύριο λόγο μια μέθοδο χορήγησης εντερικής σίτισης ασθενούς. Όταν χορηγούνται φάρμακα, ακολουθήστε το πρωτόκολλο διαχείρισης εντερικά σίτιση του νοσοκομείου ή του ιδρύματος.

Τα ιατρικά προϊόντα της Dale διατίθενται από τους αντιπροσώπους νοσοκομειακών/ιατρικών προϊόντων με τους οποίους συνεργάζεστε.

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας www.dalemed.com/patents

Πληροφορίες για παραγγελίες

485 Dale ACE Connector
Σε ατομικές συσκευασίες.
Πωλούνται σε κουτιά των 50.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP

Δεν είναι κατασκευασμένο με φυσικό ελαστικό latex

Κατασκευάζεται στην Κίνα

Τα Dale & ACE Connector είναι σήματα κατατεθέντα της Dale Medical Products, Inc. στις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Το ENFit είναι σήμα κατατεθέν της GEDSA και χρησιμοποιείται με την άδειά της.
Το Salem Sump είναι εμπορικό σήμα της Cardinal Health, Inc.
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products