
ACE* Connector® Dale® con sistema di collegamento ENFit® compatibile con ISO 80369-3 **REF 485**

(*Access Controller for Enteral o controllore dell'accesso all'apparato gastro-enterico)
Adatto ai sistemi enterici a circuito aperto o chiuso, conformi a ISO 80369-3

Istruzioni Per L'uso

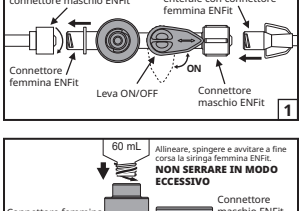


1 ***La procedura di alimentazione può essere eseguita usando la maggior parte delle sonde di alimentazione di piccolo calibro tipo ENFit, dotate di connettori ENFit, comprese le sonde Dobbhoff, i tubi PEG/PEJ, BRT per gastrostomia, i set di alimentazione GJ per gastrodigiustonomia e i tubi speciali Salem Sump™.*** Quando si usa l'***ACE Connector*** per l'alimentazione enterale, collegare l'uscita distale femmina ENFit dell'ACE al connettore maschio ENFit del tubo enterale.

Seguire le istruzioni a-d successive.

a. Collegare l'uscita femmina ENFit (lato distale) dell'ACE al connettore maschio ENFit della sonda di alimentazione del paziente.
b. Allineare il set di alimentazione enterale con il connettore femmina ENFit e avvitarlo sull'entrata maschio ENFit (lato prossimale) dell'***ACE Connector***.
c. Far ruotare la leva nella posizione ON per somministrare la formulazione di alimentazione.
d. Far ruotare la leva nella posizione OFF alla fine dell'alimentazione e rimuovere il set dall'***ACE Connector*** svitandolo.

*I tubi PEG senza palloncino possono richiedere l'impiego di un connettore bianco di transizione 80369-3 ENFit o di un adattatore universale, non fornito assieme all'***ACE Connector***.

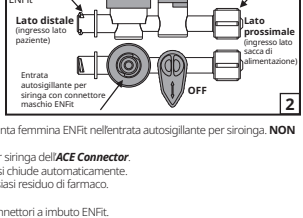

2 ***Siringa per irrigazione con punta ENFit da 60 mL/Procedura di somministrazione di farmaci liquidi e di liquami. Le porte ENFit possono ospitare siringhe con punta centrale ENFit di qualsiasi dimensione con filettatura completa.***

Per maggiore sicurezza, il nuovo ***ACE Connector*** è compatibile solo con le siringhe per irrigazione enterica con punta ENFit ed è incompatibile con le siringhe con punta per catetere o punta Luer, con i set di somministrazione con punta Luer o gli aghi ipodermici.

a. Far ruotare la leva nella posizione OFF.
b. Afferrando saldamente l'ACE, allineare, spingere e avvitare a fine corsa la siringa con punta femmina ENFit nell'entrata autosigillante per siroinga. **NON SERRARE IN MODO ECCESSIVO!** Si consiglia vivamente di irrorare prima e dopo l'uso.
c. Dispensare fluidi o farmaci o aspirare i residui gastrici tramite l'entrata autosigillante per siringa dell'***ACE Connector***.
d. Rimuovere la siringa. L'entrata autosigillante per siringa con connettore maschio ENFit si chiude automaticamente.
e. Irrorare con acqua l'entrata autosigillante per siringa finché non è pulita e priva di qualsiasi residuo di farmaco.
f. Far ruotare la leva nella posizione ON.
Questo prodotto è compatibile con i connettori di transizione a gradini ENFit e con i connettori a imbuto ENFit.

3 ***Procedura di drenaggio e di aspirazione***

Il connettore enterico ACE 485 può essere usato per l'aspirazione e il drenaggio assieme a tubi speciali Salem Sump ENFit e tubi per l'aspirazione dotati di uno speciale connettore ENFit.

4 ***Compatibilità MR condizionata*** MR ***I test non clinici hanno dimostrato che l'ACE CONNECTOR 485 ENFit Dale Medical è a compatibilità RM condizionata. Un paziente con questo dispositivo può essere sottoposto a scansione RM in modo sicuro subito dopo il posizionamento, nelle seguenti condizioni:***

- Campo magnetico statico pari solamente a 1,5 e 3 tesla.
- Massimo campo magnetico a gradiente spaziale pari o inferiore a 3000 gauss/cm.

Monopaziente / Conservare in un luogo fresco e asciutto

La legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su presentazione di prescrizione medica.

- Per consentire l'ambulazione del paziente, far ruotare la leva nella posizione OFF e scollegare il set di alimentazione. A quel punto il paziente è in grado di camminare a piacimento. L'alimentazione può ricominciare a seconda della necessità, ripetendo le procedure suindicate. In conformità agli standard medici accettati, l'***ACE Connector*** rimane incorporato nel catetere.
- Sostituire a seconda della necessità, come da protocollo ospedaliero. Se ne consiglia l'uso per più di 30 giorni.
- Se le prestazioni del dispositivo divergono dalle istruzioni o dal previsto, irrorare attentamente l'***ACE Connector*** in conformità alle istruzioni e verificare l'intero set di alimentazione enterale. Se il problema persiste, sostituire l'***ACE Connector*** ed il set di alimentazione enterale, in conformità al protocollo ospedaliero di gestione dell'alimentazione enterica.
- L'***ACE Connector*** è destinato principalmente all'alimentazione enterale dei pazienti. Quando vengono somministrati farmaci, attenersi al protocollo dell'ospedale o della struttura relativo alla gestione dell'alimentazione enterica.

I prodotti medici Dale sono disponibili presso il distributore preferito di articoli sanitari ed ospedalieri.

Brevetto www.dalemed.com/patents

Informazioni Sugli Ordinativi

485 Dale ACE Connector
Confezione singola.
Venduto in scatole da 50.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP

Non prodotto in lattice di gomma naturale

Prodotto in Cina

Dale e ACE Connector sono marchi registrati di Dale Medical Products, Inc. negli USA, nell'UE e nel Regno Unito.
ENFit è un marchio registrato di GEDSA, utilizzato con la sua autorizzazione.
Salem Sump è un marchio di Cardinal Health, Inc.
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products