ISO 80369-3 準拠の ENFit® 接続システム付き Dale® ACE* Connector®

REF 485


(*経腸用アクセスコントローラ)
ISO 80369-3 規格に準拠する開式閉式どちらの経腸システムでも使用可

使用方法

1 ***栄養剤投与には、Dobbhoff、PEG、PEJ、BRT***
胃瘻造設、G/J、栄養剤投与セットおよびENFitコネクタの付いた専用Salem Sump™チューブを含むENFitタイプの小径投与チューブが使用できます。


a. 経腸栄養剤投与を行うために ***ACE Connector*** を使用する場合、ACEのオス型 ENFit 遠位端を経腸チューブのオス型 ENFit コネクタに接続します。下記 a ~ d に従ってください。
b. ACE のメス型 ENFit ポート (遠位端) を患者栄養剤投与チューブにあるオス型 ENFit コネクタに接続します。
c. 経腸栄養剤投与セットの ENFit メス型コネクタを ***ACE Connector*** のオス型 ENFit ポート (近位端) と合わせ、回転させます。
d. ハンドルを ON の位置に回して栄養剤を投与します。
e. 投与が完了したらハンドルを OFF の位置に回し、栄養剤投与セットを逆に回転させ ***ACE Connector*** から外します。

*非バルーン型のPEG チューブの場合、***ACE Connector***に付いていない白色 80369-3 ENFit トランジットコネクタまたは万能アダプタが必要なこともあります。

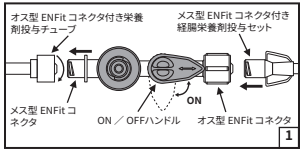

2 ***60mL ENFitチップ灌漑シリンジ/ラベッジと液体薬物送達手順、ENFitポートは、どのサイズのENFitセンターチップシリンジにも対応します。***
安全面のため、新しい *ACE Connector* は ENFit 先端経腸洗浄シリンジのみ使用可能で、カテーテル先端洗浄シリンジ、ルアー先端シリンジ、ルアー先端投与セットや皮下注射器管理セットは使用できません。

a. ハンドルを OFF の位置に回します。
b. ***ACE Connector*** をしっかり持ちながら ENFit メス型先端シリンジをオートシール・シリンジ・メディケーション・ポートに合わせ、きっちりはまるまで押しながら回転させます。この際きつく締め過ぎないでください!使用前後にリンスすることをお奨めします。

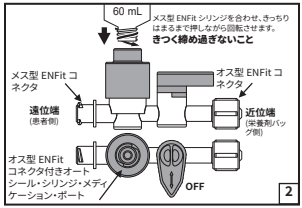

c. ***ACE Connector*** オートシール・シリンジ・メディケーション・ポートに液体あるいは薬剤を注入するか、必要な場合は胃内残存物を取り除きます。
d. シリンジを外すと、オス型 ENFit コネクタのあるオートシール・シリンジ・メディケーション・ポートが自動的に密閉されます。
e. 残留薬剤が全て無くなるまでオートシール・シリンジ・メディケーション・ポートに水を流しリンスします。
f. ハンドルを ONの位置に回します。
本製品は、ENFit ステップ付きトランジット・コネクタおよび ENFit 漏斗コネクタと一緒に使用できます。

3 ***ドレナージ&吸引方法***
ACE 485 経腸コネクタで吸引およびドレナージを行うには、専用ENFitアダプタを用いたENFit Salem SumpチューブとSuctionチューブを使用すること。

4 ***MR Conditional (MRでは条件付)*** ***非臨床において、Dale Medical 485 ENFit *ACE CONNECTOR* は、MR Conditionalであることが実証されています。本製品を使用する患者は、以下の条件下で取付後直ちに安全にMR検査を受けることができます。***
▪ 静磁場強度 1.5 テスラまたは 3 テスラのみ。 ▪ 最大傾斜磁場 3000 ガウス ／ cm 以下。

1人の患者のみに使用 ／乾燥した涼しい場所で保管してください。
本機器の販売は、米国連邦法により医師あるいは医師の指示によること、と制限されています。
▪ 患者を歩かせる時には、ハンドルを OFF の位置に回し、投与セットを外します。これで患者は自由に歩くことができます。上記手順を繰り返すことにより、投与を必要に応じて再開できます。***ACE Connector*** は受容されている医療基準に準じカテーテルの一部となっています。
▪ 病院のプロトコルに従い、必要に応じて取り換えてください。30日間を超える使用は お控えください。
▪ 機器が説明通りあるいは期待通りに機能していない場合には、説明書に従って完全に ***ACE Connector*** をリンスし、経腸投与の設定を確かめます。問題が解決しない場合は、病院の「経腸投与管理」プロトコルに従い、新しい ***ACE Connector*** と経腸投与セットに取り換えてください。
▪ ***ACE Connector*** は主に患者の経腸栄養剤投与方法を提供するものです。薬剤投与の際は、病院や施設の経腸栄養剤投与の管理プロトコルに従ってください。

Dale社の医療品は優先病院 ／ 医療品用供給ディーラーよりお求めください。
特許 www.dalemed.com/patents

発注情報
485 Dale ACE Connector
個別包装
1箱 50 個入り

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP
天然ゴムラテックスは含まれておりません。

中国製

Dale & ACE Connectorは、米国、EU、および英国におけるDale Medical Products, Inc.の登録商標です。
ENFitは、GEDSAの登録商標で、同社の許可を得て使用しています。
Salem SumpはCardinal Health, Inc.の商標です。
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products