Dale® ACE* Connector® med ISO 80369-3-kompatibelt ENFit® -tilkobling

REF 485

(*Access Controller for Enteral)

Fungerer med åpne eller lukkede enterale systemer som oppfyller kravene i ISO 80369-3


Bruksanvisning

***1** Ernæringsprosedyren kan brukes med ENFit-ernæringsslanger med liten diameter, blant annet Dobbhoff, PEG, PEJ, BRT-slanger for gastrostomi, G/J, administrasjonssett for ernæring og spesielle Salem Sump™-slanger med ENFit-koblinger.*

Når ***ACE Connector*** brukes til enteral ernæring, skal den distale ENFit-hunnporten på ACE kobles til en ENFit-hannkobling på en enteral slange. Følg anvisningene fra a til d nedenfor.


a. Koble ENFit-hunnporten (distalt) på ACE til ENFit-hannkoblingen på tilførselsslangen til pasienten.
b. Rett inn og vri settet for enteral ernæring med ENFit-hunnkoblingen inn på ENFit-hannporten (proksimalt) på ***ACE Connector***.
c. Vri håndtaket til PÅ-stilling for å administrere ernæring.
d. Vri håndtaket til AV-stilling etter at administrasjonen av ernæring er fullført, og fjern tilførselssettet fra ***ACE Connector*** ved å vri tilbake.

*Med ballongfrie PEG-slanger kan det være nødvendig å bruke en hvit ENFit-overgangskobling av typen 80369-3 eller en universaladapter – denne leveres ikke med ***ACE Connector***.

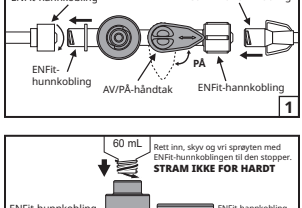

***2** 60mL ENFit spylesprøyte med spiss/spylingsprosedyre for spyling og tilførsel av flytende medisiner. ENFit-portene har plass til alle størrelser ENFit-sprøyter med full gjenge.*

Den nye ***ACE Connector*** kan, som en sikkerhetsforanstaltning, bare brukes med enterale skyllesprøyter med ENFit-spiss, og kan ikke brukes med sprøyter med kateterspiss, sprøyter med luerspiss, administrasjonssett med luerspiss eller hypoderme injeksjonskanyler.

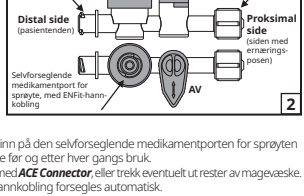

a. Vri håndtaket til AV-stilling.
b. Hold godt i ***ACE Connector***, og rett inn, skyv og vri sprøyten med ENFit-hunnspiss inn på den selvforseglende medikamentporten for sprøyten til den stopper. - **STRAM IKKE FOR HARDT!** Det anbefales på det sterkeste å skylle før og etter hver gangs bruk.
c. Tilfør væske eller medikamenter i den selvforseglende medikamentporten for sprøyte med ***ACE Connector***, eller trekk eventuelt ut rester av magevæske.
d. Fjern sprøyten. Den selvforseglende medikamentporten for sprøyte, med ENFit-hannkobling forsegles automatisk.
e. Skyll den selvforseglende medikamentporten for sprøyte med vann til eventuelle medikamentrester er borte.
f. Vri håndtaket til PÅ-stilling.

Dette produktet er kompatibelt med trinninndelte ENFit-overgangskoblinger og traktformede ENFit-koblinger.

***3** Prosedyre for tømming og suging*

ACE 485 enteral kobling kan brukes til suging og tømming med spesialutstyrte ENFit Salem Sump-slanger og sugeslanger med en spesiell ENFit-adapter.

***4** Trygg ved bruk i visse MR-miljøer ⚠ MR Ikke-klinisk testing har påvist at 485 ENFit ACE CONNECTOR fra Dale Medical er trygg ved bruk i visse MR-miljøer. En pasient med denne enheten kan trygt skannes i et MR-system rett etter innsetting, under følgende forhold:*

- Statisk magnetfelt på bare 1,5 eller 3 tesla.
- Maksimalt spatielt, gradient magnetfelt på maksimalt 3000 gauss/cm eller lavere.

For bruk på én pasient / oppbevares kjølig og tørt

Ifølge føderal lovgivning (USA) skal dette produktet bare selges eller forskrives av lege.

- For ambulering av pasienten skal håndtaket vris til AV-stilling og tilførselssettet frakobles. Pasienten kan nå ambulere etter ønske. Ernæringstilførselen kan gjenopptas etter behov ved å gjenta prosedyrene ovenfor. ***ACE Connector*** er en del av kateteret, i tråd med godkjente medisinske standarder.
- Skiftes etter behov, i samsvar med sykehusets retningslinjer. Bruk i mer enn 30 dager frarådes.
- Hvis enheten ikke fungerer i tråd med anvisningene eller forventningene, skal ***ACE Connector*** skylles grundig i samsvar med anvisningene og oppsettet for enteral administrasjon kontrolleres. Hvis problemet vedvarer, skal utstyret skiftes ut med en ny ***ACE Connector*** og et nytt sett for enteral administrasjon etter behov, i samsvar med sykehusets retningslinjer for enteral administrasjon.
- ***ACE Connector*** er primært en administrasjonsmetode for enteral ernæring til pasienter. Følg sykehusets eller institusjonens retningslinjer for enteral administrasjon hvis utstyret skal brukes til administrasjon av medikamenter.

Medisinske produkter fra Dale fås hos forhandlere av sykehusutstyr / medisinske produkter.

Patent www.dalemed.com/patents

Bestillingsinformasjon

485 Dale ACE Connector Individuelt pakket. Selges i esker à 50 stk.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP

Ikke produsert med lateks av naturgummi

Produsert i Kina

Dale & ACE Connector er registrerte varemerker for Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannia.
ENFit er et registrert varemerke for GEDSA brukt med deres tillatelse.
Salem Sump er et varemerke for Cardinal Health, Inc.
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products