Dale® ACE* Connector® z łącznikiem ENFit®, zgodnym z ISO 80369-3

REF 485

(*Kontroler dostępowy do karmienia dojelitowego)
Do użytku z otwartymi lub zamkniętymi systemami do karmienia dojelitowego, zgodnymi z ISO 80369-3


Wskazówki Dotyczące Użycia

1 ***Procedurę podawania płynów można stosować do małośrednicowych sond podawowych typu ENFit, w tym Dobbhoff, PEG, PEJ, BRT Gastrostomy, G/J, zestawów do podaży i specjalnych sond Salem Sump™ wyposażonych w łączniki ENFit.***

W przypadku używania do podaży dojelitowej łącznika ACE, należy podłączyć końcówkę żeńską dystalną ENFit łącznika ACE do łącznika męskiego ENFit sondy dojelitowej. Należy stosować się do instrukcji a-d zamieszczonych poniżej.

a. APodłączyć końcówkę żeńską ENFit (strona dystalna) łącznika ACE do łącznika męskiego ENFit dojelitowej sondy podawowej.
b. Ustawić odpowiednio końcówkę żeńską ENFit zestawu do podaży dojelitowej względem końcówki męskiej ENFit (strona proksymalna) łącznika ACE, nałożyć ją i dokręcić.
c. Przestawić przełącznik w położenie WŁ. (ON), aby otworzyć dopływ płynu.
d. Po zakończeniu podawania płynów przestawić przełącznik w położenie WYŁ. (OFF) i odłączyć zestaw od łącznika ACE, odkręcając go.

*Sondy bez balonika PEG mogą wymagać zastosowania białego łącznika przejściowego 80369-3 ENFit lub przejściówki uniwersalnej, która nie jest dostarczana wraz z łącznikiem ACE.

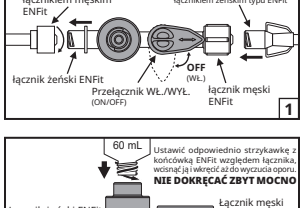


2 ***Strzykawka do irygacji z końcówką ENFit o pojemności 60 mL/procedura podawania płynów i leków. Porty ENFit mogą pomieścić strzykawki z końcówką centralną ENFit o dowolnym rozmiarze z pełnym gwintem.***

W celu zwiększenia bezpieczeństwa nowy łącznik ACE pasuje jedynie do strzykawek do przepłukiwana zgłębników dojelitowych z końcówką ENFit, a nie pasuje do strzykawek z końcówką cewnikową, strzykawek z końcówką Luera, zestawów podawowych z końcówką Luera ani igieł podskórnych.

a. Przestawić przełącznik w położenie WYŁ. (OFF).
b. Przytrzymując stabilnie łącznik ACE, ustawić odpowiednio strzykawkę z końcówką żeńską ENFit względem końcówki do podawania leku strzykawki samouszczelniającej Auto-Seal, włożyć tę końcówkę i przekręcić do momentu wyczucia oporu. - **NIE DOKRĘCAĆ ZBYT MOCNO!** Zdecydowanie zalecane jest płukanie przed użyciem i po użyciu.
c. W zależności od potrzeby podawać płyn lub lek do samouszczelniającej końcówki strzykawki na łączniku ACE albo odciągnąć gastryczne płyny rezydualne.
d. Odłączyć strzykawkę. Końcówka do podawania leku strzykawki samouszczelniającej z łącznikiem męskim ENFit automatycznie szczelnie się zamknie.
e. Płukać wodą przez końcówkę do podawania leku strzykawki samouszczelniającej do chwili, gdy w wodzie nie będzie resztek leku.
f. Przestawić przełącznik w położenie WŁ. (ON).

Tego produktu można używać z przejściówką stopniową i łącznikami stożkowymi ENFit.

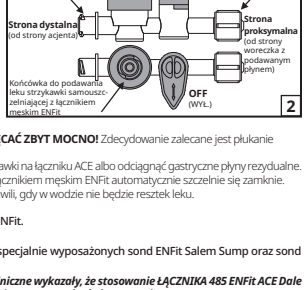

3 ***Procedura drenowania i odsysania***

Łącznika dojelitowego ACE 485 można używać do odsysania i drenażu przy użyciu specjalnie wyposażonych sond ENFit Salem Sump oraz sond do odsysania Suction ze specjalną przejściówką ENFit.

4 ***Bezpieczne stosowanie w określonych warunkach środowiska MR. Testy niekliniczne wykazały, że stosowanie ŁĄCZNIKA 485 ENFit ACE Dale Medical w środowisku rezonansu magnetycznego jest warunkowe. Można bezpiecznie przeprowadzać obrazowanie rezonansem magnetycznym u pacjenta bezpośrednio po założeniu urządzenia, jeżeli spełnione są następujące warunki:***

- Natężenie statycznego pola magnetycznego wynosi albo 1,5 tesli, albo 3 tesle.
- Indukcja statycznego pola magnetycznego nie przekracza 3000 gausów/cm.

Do zastosowania u jednego pacjenta / Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

- Przed przemieszczeniem pacjenta należy przestawić przełącznik w położenie WYŁ. (OFF) i odłączyć zestaw podawowy. Po wykonaniu tych czynności pacjent może się swobodnie przemieszczać. Proces podawania płynów można wznawiać w miarę potrzeb, powtarzając opisaną powyżej procedurę.
- Wymieniać w razie potrzeby zgodnie ze szpitalną procedurą. Nie zaleca się stosowania przez okres dłuższy niż 30 dni..
- Jeżeli urządzenie nie działa zgodnie z instrukcjami lub oczekiwaniami, należy dokładnie przepłukać łącznik ACE zgodnie z instrukcją i sprawdzić ustawienia zestawu do dojelitowej podaży. Jeżeli problem się powtarza, należy w razie potrzeby wymienić na nowy łącznik ACE zgodnie z procedurą „zarządzania dojelitowym podawaniem płynów".
- Łącznik ACE jest stosowany głównie do dojelitowego karmienia pacjentów. W przypadku podawania leków należy stosować się do szpitalnej lub ośrodkowej procedury zarządzania dojelitowym podawaniem płynów.

Produkty medyczne firmy Dale są dostępne u preferowanego dostawcy materiałów i urządzeń medycznych i szpitalnych.
Patent www.dalemed.com/patents

Informacje o Zamówieniach

485 Dale ACE Connector
Opakowanie indywidualne.
Sprzedawane w kartonach po 50 szt.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP

Wyprodukowano bez użycia kauczuku naturalnego (lateksu)

Wyprodukowano w Chinach

Dale i ACE Connector są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dale Medical Products, Inc. w USA, UE i Wielkiej Brytanii.
ENFit jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy GEDSA, użytym za jej zgodą.
Salem Sump jest znakiem towarowym firmy Cardinal Health, Inc.
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale® Medical Products