
Dale® ACE* Connector® com um sistema de conexão ENFit® compatível com o standard ISO 80369-3 **REF 485**

(*Access Controller for Enteral, ou Controlador de Acesso para Alimentação Enteral)
Funciona com sistemas enterais abertos ou fechados que cumpram o standard ISO 80369-3

Instruções Para a Utilização

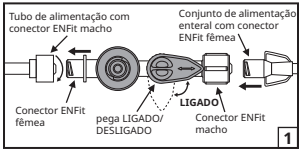


1 ***O procedimento de alimentação pode ser utilizado com tubos de alimentação de pequeno calibre, incluindo Dobbhoff, PEG, PEJ, tubos de gastrostomia para a substituição de balão (BRT), tubos de gastrostomia/jejunostomia (G/J), conjuntos de administração de alimentação, além de tubos especiais Salem Sump™ equipados com conectores ENFit.***

Quando utilizar o ***ACE Connector*** para a alimentação enteral, ligue a porta distal ENFit fêmea do ACE ao conector ENFit macho de um tubo enteral. Siga as instruções a-d a seguir.

a. Ligue a porta ENFit fêmea (lado distal) do ACE ao conector ENFit macho no tubo do doente.
b. Alinhe e rosque o conjunto de alimentação enteral com o conector ENFit fêmea na porta ENFit macho (lado proximal) do ***ACE Connector***.
c. Gire a pega para a posição LIGADO para fornecer fórmula de alimentação.
d. Gire a pega para a posição DESLIGADO quando encerra-se a alimentação e, girando para o lado contrário, remova o conjunto de alimentação do ***ACE Connector***.

***No caso de tubos PEG sem balão, poderá ser necessária a utilização de um conector de transição ENFit 80369-3 branco ou de um adaptador universal, não fornecido com o *ACE Connector*.**

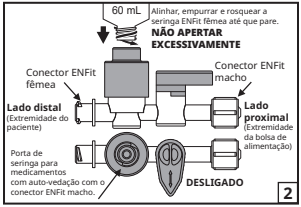

2 ***Seringa de irrigação com ponta ENFit de 60 mL/procedimento de administração de medicamentos líquidos e de lavagens. As portas ENFit podem acomodar seringas de ponta central ENFit de qualquer tamanho com roscas completas.***

Como procedimento de segurança, o novo ***ACE Connector*** aceita apenas seringas de irrigação com ponta ENFit e não aceita seringas com ponta de cateter, seringas com ponta luer, conjuntos de administração com ponta luer ou agulhas hipodérmicas.

a. Gire a pega para a posição DESLIGADO.
b. Enquanto segura firmemente o ***ACE Connector***, alinhe, empurre e rosque a seringa de ponta fêmea ENFit na porta de seringa para medicamentos com auto-vedação até que pare. - **NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE!** Recomenda-se veementemente enxaguar antes e depois da utilização.
c. Dispense fluidos ou medicamentos na porta de seringa para medicamentos com auto-vedação do ***ACE Connector*** ou, se preferir, retire resíduos gástricos.
d. Remova a seringa. A porta de seringa para medicamentos com auto-vedação com o interface para o ENFit Connector será vedada automaticamente.
e. Carregue com água através da porta de seringa para medicamentos com auto-vedação até que fique limpo de todo resíduo de medicamento.
f. Gire a pega para a posição LIGADO.

Este produto é compatível com o conector de transição escalonado ENFit e com os conectores de funil ENFit.

3 ***Procedimento de drenagem e sucção***

Pode-se utilizar o ACE 485 Enteral Connector para a sucção e a drenagem com tubos Salem Sumo ENFit especialmente equipados e com tubos de sucção que contem com um adaptador ENFit especial.

4 ***RM Condicional/ Testes não clínicos demonstraram que o Dale Medical 485 ENFit ACE CONNECTOR tem compatibilidade condicional com RM. Um doente com este dispositivo pode submeter-se ao exame em um sistema de RM com segurança, imediatamente após a sua colocação, sob as condições em baixo:***

- Campo magnético estático de 1,5 tesla e 3 tesla, apenas.
- Campo magnético gradiente espacial máximo de 3000 Gauss/cm ou inferior.

Para a utilização num único paciente / Armazene num local fresco e seco

Leis federais (EUA) ditam que a venda deste dispositivo deve ser feita exclusivamente por um médico ou mediante um pedido desse profissional.

- Para dar mobilidade ao paciente, gire a pega para a posição DESLIGADO e desligue o conjunto de alimentação. O paciente passa então a ter mobilidade, como desejado. Pode-se voltar a efectuar a alimentação, como necessário, ao se repetir os procedimentos em cima. O ***ACE Connector*** mantém-se como parte do cateter, de acordo com os standards médicos aceites.
- Substitua como necessário, de acordo com o protocolo hospitalar. Não se recomenda para a utilização por mais de 30 dias.
- Caso o desempenho do dispositivo não esteja de acordo com as instruções ou como esperado, carregue totalmente o ***ACE Connector***, de acordo com as instruções, e verifique o conjunto de distribuição enteral. Se o problema persistir, substitua por um ***ACE Connector*** e por um conjunto de distribuição enteral novos, como necessário, de acordo com o protocolo de "gestão de alimentação enteral" do hospital.
- Basicamente, o ***ACE Connector*** proporciona um método de distribuição para a alimentação enteral dos doentes. Quando administrar medicamentos, siga o protocolo de gestão de alimentação enteral do hospital ou da organização.

Os produtos médicos da Dale encontram-se disponíveis no revendedor de materiais hospitalares/médicos da sua preferência.
Patente www.dalemed.com/patents

Informações Para Pedidos

485 Dale ACE Connector
Acondicionado em unidades individuais.
Vendido em caixas de 50.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP

Não fabricado com borracha de látex natural

Feito em China

Dale e ACE Connector são marcas comerciais registadas da Dale Medical Products, Inc. nos EUA, UE e Reino Unido
ENFit é uma marca registada da GEDSA utilizada com a sua permissão.
Salem Sump é uma marca comercial da Cardinal Health, Inc.
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products
942253-ART_REV_G