Dale® ACE* Connector® med ISO 80369-3-kompatibel ENFit® -kopplingssystem

REF 485

(*Access Controller for Enteral, enhet för styrning av enteral åtkomst)
Kan användas med öppna eller slutna enterala system som uppfyller kraven enligt ISO 80369-3


Bruksanvisning

1 ***Matning: Matningssonder av ENFit-typ med litet lumen, inklusive Dobbhoff, PEG, PEJ, BRT-gastrostomisond, G/J-sonder, administreringsset för sondmatning samt särskilda Salem Sump™-sonder försedda med ENFit-kopplingar kan användas.***

När ***ACE Connector*** används för enteral matning, anslut den distala hon-ENFit-porten på ACE till han-ENFit-kopplingen på en enteral sond. Följ anvisningarna a–d nedan.

a. Anslut hon-ENFit-porten (distala sidan) på ACE till han-ENFit-kopplingen på patientmatningssonden.
b. Rikta in och vrid på det enterala matningssetet med hon-ENFit-kopplingen på han-ENFit-porten (proximala sidan) på ***ACE Connector***.
c. Vrid handtaget till läget ON (PÅ) för att tillföra sondnäring.
d. Vrid handtaget till läget OFF (AV) när matningen är avslutad och avlägsna matningssetet från ***ACE Connector*** genom att vrida loss det.


*PEG-sonder utan ballong kan kräva användning av en vit 80369-3 ENFit-övergångskoppling eller en universaladapter, vilka inte medföljer ***ACE Connector***.

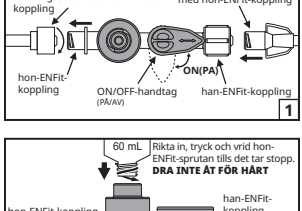

2 ***60 mL ENFit-spruta med spets för bevattning/Lavage och administrering av flytande läkemedel. ENFit-portarna kan användas för alla storlekar av ENFit-sprutor med centrumspets och full gänga.***

Som en säkerhetsfunktion kan den nya ***ACE Connector*** endast anslutas till enterala spolsprutor med ENFit-spets och kan inte anslutas till sprutor med kateterspets, sprutor med luerspets, administreringsset med luerspets eller injektionsnålar.

a. Vrid handtaget till läget OFF (AV).
b. Håll stadigt i ***ACE Connector*** och rikta in, tryck och vrid in sprutan med hon-ENFit-spets i den självtätande sprutporten för läkemedel tills det tar stopp. - **DRA INTE ÅT FÖR HÅRT!** Det rekommenderas starkt att spola före och efter användning.
c. Dispensera vätska eller läkemedel i den självtätande sprutporten för läkemedel på ***ACE Connector*** eller dra ut ventrikelinnehåll om så önskas.
d. Avlägsna sprutan. Den självtätande sprutporten för läkemedel med han-ENFit-koppling förseglas automatiskt.
e. Spola med vatten via den självtätande sprutporten för läkemedel tills den är rensad från läkemedelsrester.
f. Vrid handtaget till läget ON (PÅ).

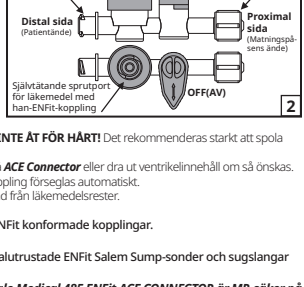

Denna produkt är kompatibel med ENFit stegade övergångskopplingar och ENFit konformade kopplingar.

3 ***Tömning och sugning***

ACE 485 Enteral Connector kan användas för sugning och tömning med specialutrustade ENFit Salem Sump-sonder och sugslangar med en särskild ENFit-adapter.

4 ***MR-villkorlig (MR Conditional) MR Icke-klinisk testning har visat att Dale Medical 485 ENFit ACE CONNECTOR är MR-säker på vissa villkor (MR Conditional). En patient med denna produkt kan utan risk skannas i ett MR-system omedelbart efter placeringen, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:***

- Statiskt magnetfält på endast 1,5 tesla och 3 tesla.
- Maximalt magnetiskt gradientfält på högst 3 000 Gauss/cm.

Endast för användning till en patient/förvaras svalt och torrt

Enligt federal lagstiftning (USA) får denna enhet endast säljas av eller på ordination av läkare.

- För uppegående patient, vrid handtaget till läget OFF (AV) och koppla bort matningssetet. Patienten kan sedan vara uppegående i önskad omfattning. Matning kan återupptas efter behov genom att ovanstående procedurer upprepas. ***ACE Connector*** sitter kvar som en del av katetern i enlighet med vedertagna medicinska förfaranden.
- Ska bytas ut efter behov enligt sjukhusets vedertagna rutiner. Rekommenderas inte för användning i mer än 30 dagar.
- I händelse av att produkten inte fungerar enligt anvisningarna eller så som förväntat, spola ***ACE Connector*** noga enligt anvisningarna och kontrollera iordningställningen av den enterala tillförseln. Om problemet kvarstår, byt till en ny ***ACE Connector*** och nytt enteralt matningsset efter behov, enligt sjukhusets vedertagna rutiner för enteral matning.
- ***ACE Connector*** tillhandahåller primärt en tillförselsmetod för enteral matning av patienter. Vid tillförsel av läkemedel ska sjukhusets eller vårdenhetens vedertagna rutiner för enteral matning följas.

Dale medicinska produkter finns att tillgå från er försäljare av sjukhus-/medicinska produkter.
Patent www.dalemed.com/patents

Beställningsinformation

485 Dale ACE Connector
Individuellt förpackad.
Säljs i kartonger om 50 st.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP

Ej tillverkade med naturgummilatex

Tillverkas i Kina

Dale & ACE Connector är registrerade varumärken som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA, EU och Storbritannien.
ENFit är ett registrerat varumärke som tillhör GEDSA och används med deras tillstånd.
Salem Sump är ett varumärke som tillhör Cardinal Health, Inc.
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products