Dale® ACE* Connector® เป็นระบบการเชื่อมต่อ พร้อม 80369-3 ที่ใช้แทนกันได้กับระบบ ENFit®

REF 485


(*ตัวควบคุมการเข้าถึงสำหรับ Enteral)
ทำงานกับระบบการเข้าถึงแบบเปิดหรือปิดซึ่งเป็นไปตาม ISO 80369-3

วิธีการใช้งาน

1 ***ขั้นตอนการให้อาหารสามารถใช้ท่อเจาะขนาดเล็กให้อาหารแบบ ENFit รวมทั้ง Dobbhoff PEG, PEJ, BRT, การเจาะใส่ท่อกระเพาะอาหาร (Gastrostomy), G-J, ชุดการให้อาหาร และหลอด Salem Sump™ ชนิดพิเศษที่เชื่อมต่อด้วยคอนเน็คเตอร์ ENFit***
เมื่อใช้คอนเน็คเตอร์ ACE ในการให้อาหารทางสายยาง ให้ต่อพอร์ตปลายของ ENFit เพศเมียของ ACE เข้ากับคอนเน็คเตอร์ ENFit เพศผู้ของท่อให้อาหารทางสาย โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำข้อ ก-ง ที่อยู่ด้านล่าง

a. ต่อพอร์ต ENFit เพศเมีย (ด้านปลาย) ของ ACE เข้ากับคอนเน็กเตอร์ ENFit เพศผู้ บนท่อให้อาหารของผู้ป่วย
b. ปรับและหมุนเกลียวชุดให้อาหารทางสายกับคอนเน็คเตอร์ ENFit เพศเมียเข้ากับ พอร์ต ENFit เพศผู้ (ด้านต้น) ของคอนเน็คเตอร์ ACE
c. หมุนที่จับไปยังตำแหน่ง เปิด (ON) เพื่อส่งอาหารสูตรผสม
d. หมุนที่จับไปยังตำแหน่ง ปิด (OFF) เมื่อให้อาหารเสร็จแล้วและก อดชุดให้อาหารออก จากคอนเน็คเตอร์ ACE โดยการคลายเกลียวออก


*ท่อ PEG ที่ไม่มีลูกโป่งอาจต้องใช้กับตัวเชื่อมการส่งผ่าน 80369-3 ENFit สีขาว หรือตัวปรับอเนกประสงค์ซึ่งไม่ได้มาพร้อมกับคอนเน็คเตอร์ ACE

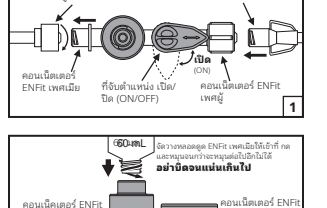

2 ***60mL ENFit tip irrigation syringe/Lavage และขั้นตอนการจัดส่งยาเหลว พอร์ต ENFit สามารถรองรับกระบอกฉีดยาปลายตรงสำหรับ ENFit ขนาดใดก็ได้ที่มีเกลียวเต็ม***
เพื่อเป็นคุณลักษณะด้านความปลอดภัย คอนเน็คเตอร์ ACE ตัวใหม่จะใช้ได้เฉพาะกับหลอดดูดระล้างที่ปลายของ ENFit เท่านั้น และจะใช้ไม่ได้กับหลอดดูดปลายชนิดหลอดสวน, หลอดดูดปลายชนิด Luer, ชุดให้ยาส่วนปลายชนิด Luer หรือเข็มฉีดยา

a. หมุนที่จับไปยังตำแหน่ง ปิด (OFF)
b. ในขณะที่ยึดคอนเน็คเตอร์ ACE ให้เข้าที่ให้มั่น กดและหมุนปลายหลอดดูด ENFit เพศเมียให้เข้ากับพอร์ตยาของหลอดดูดแบบปิดผนึกอัตโนมัติจนกระทั่งหมุนอีกไม่ได้ไปต่อ– อย่าปิดจนแน่นเกินไป! ขอแนะนำอย่างยิ่งว่าให้นำไปล้างน้ำก่อนและหลังการใช้งาน
c. ถ่ายของเหลวที่ขวยเข้าในคอนเน็คเตอร์ ACE ซึ่งเป็นพอร์ตหลอดดูดยาแบบปิดผนึกอัตโนมัติ หรือหลอดดูดสิ่งตกค้างในกระเพาะอาหาร หากต้องการ
d. ถอดหลอดดูดออก พอร์ตยาที่เป็นหลอดดูดยาแบบปิดผนึกอัตโนมัติที่มีคอนเน็คเตอร์ ENFit เพศผู้จะปิดผนึกโดยอัตโนมัติ
e. ล้างพอร์ตหลอดดูดยาแบบปิดผนึกอัตโนมัติด้วยน้ำให้ทั่ว ๆ จนกระทั่งยาที่ตกค้างออกหมด
f. หมุนที่จับไปที่ตำแหน่ง เปิด (ON)

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้งานได้กับ ENFit ที่เป็นคอนเน็คเตอร์การส่งผ่านแบบทีละขั้น และ ENFit ที่เป็นคอนเน็คเตอร์แบบรูปทรงกรวย

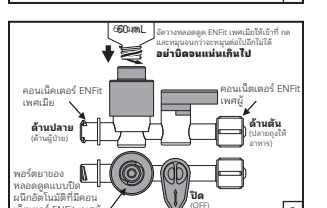

3 ***ขั้นตอนการระบายและการดูด***
คอนเน็คเตอร์การให้อาหาร 485 ของ ACE สามารถนำมาใช้ในการดูดและการระบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหลอดดูด Salem Sump ของ ENFit และหลอดดูดที่มีตัวดอแล็ปเตอร์ ENFit ชนิดพิเศษ

4 ***MR Conditional ซึ่งใช้ได้กำการทดสอบทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า คอนเน็คเตอร์ ACE ของ Dale Medical 485 ENFit ถือ MR Conditional ผู้ป้วยที่ใช้อุปกรณ์นี้สามารถตรวจดูรายละเอียดด้านความปลอดภัยในระบบ MR ได้โดยทันที หลังการจัดวางให้เข้าที่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปน:"***

- สนามแม่เหล็กแบบสถิตยิวสัยเฉพาะ 1.5 Tesla และ 3-Tesla เท่านั้น
- สนามแม่เหล็กเกรเดียนท์เชิงพื้นที่สูงสุดของ 3000 เกาส์ (G) หรือต่ำกว่า

สำหรับผู้ป่วยแบบใช้ครั้งเดียว / เก็บรักษาในที่ที่เย็นและแห้ง
กฎหมายรัฐบาลกลาง (ของประเทศสหรัฐอเมริกา) กำหนดว่าอุปกรณ์นี้จะต้องจำหน่ายโดยหรือตามคำสั่งของแพทย์

- สำหรับผู้ป่วยที่เด็นไปมา หมุนที่จับไปที่ตำแหน่ง ปิด (OFF) และถอนชุดให้อาหารออก จากนั้นผู้ป่วยสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามที่ต้องการ การให้อาหารสามารถเริ่มได้ตามที่ต้องการโดยการปฏิบัติตามขั้นตอนข้อผู้ด้านบนซึ่ ตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ยอมรับได้ คอนเน็คเตอร์ ACE เป็นส่วนหนึ่งของหลอดสาย
- เปลี่ยนได้ตามความจำเป็นต่อโพรโคลอยของโรงพยาบาล ไม่แนะนำให้ใช้เกิน 30 วัน
- ในกรณีที่อุปกรณ์นี้ไม่ทำงานตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำหรือตามที่คาดหวังไว้ ให้ล้างคอนเน็คเตอร์ ACE ด้วยน้ำให้ทั่วตามคำแนะนำ จากนั้นตรวจสอบการจัดตั้งการให้อาหารทางสายยาง หากยังคงมีปัญหาอยู่ให้เปลี่ยนใบให้คอนเน็คเตอร์ ACE ตัวใหม่และต้องทำการจัดตั้งการให้อาหารทางสายยางใหม่อีกครั้ง "โปรดปฏิบัติตามโพรโคลอยของโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ "การจัดการด้านการให้อาหารทางสายยาง"
- คอนเน็คเตอร์ ACE ส่วนใหญ่จะมีวิธีการส่งมอบสำหรับการให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย เมื่อการส่งยาให้ปฏิบัติตามโพรโคลอยของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ในการจัดการด้านการให้อาหารทางสายยาง

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ Dale มีจำหน่ายที่โรงพยาบาล/ตัวแทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่ท่านใช้บริการ
สิทธิบัตร www.dalemed.com/patents

ข้อมูลการสั่งซื้อ

485 Dale ACE Connector
ต้นรรจุแยกชิ้นกัน
จำหน่ายเป็นกล่อง ละ 50 ชิ้น

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
โทรศัพท์: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP
ไม่ได้ผลิตด้วยยางลาเท็กซ์ ธรรมชาต

ผลิตในประเทศจีน

Dale & ACE Connector เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร
ENFit เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ GEDSA ที่ใช้โดยได้รับอนุญาต
Salem Sump เป็นเครื่องหมายการค้าของ Cardinal Health, Inc.
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products
942253-ART_REV_G