Dale® ACE* Connector®, ISO 80369-3 uyumlu ENFit® bağlantı

REF 485

(*Enteral için Erişim Kontrolörü)
ISO 80369-3 uyumlu açık veya kapalı enteral sistemlerle çalışır


Kullanma Talimatları

1 ***Besleme İşlemi Dobbhoff, PEG, PEJ, BRT Gastrostomy, G/J, besleme uygulama setleri ve ENFit Konektörlü özel Salem Sump™ tüpleri dahil ENFit tipi küçük açıklıklı besleme tüpleriyle kullanılabilir.***

ACE Connector enteral besleme için kullanıldığında ACE dişi ENFit distal portunu bir enteral tüpün erkek ENFit Konektörüne takın. Aşağıdaki a-d talimatlarını izleyin.

a. ACE dişi ENFit portunu (distal taraf) hasta besleme tüpündeki erkek ENFit konektörüne takın.
b. ENFit dişi konektörlü enteral besleme tüpünü ***ACE Connector*** kısmının erkek ENFit portuyla (proksimal taraf) hizalayıp bükün.
c. Besleme formülünü iletmek için sapı AÇIK pozisyonuna çevirin.
d. Besleme tamamlandığında sapı KAPALI pozisyonuna çevirin ve besleme setini ***ACE Connector*** kısmından tersine çevirerek çıkarın.

*Balonsuz PEG tüpleri ***ACE Connector*** kısmına sağlanmayan bir üniversal adaptör veya beyaz 80369-3 ENFit geçiş konektörü kullanımını gerektirebilir.

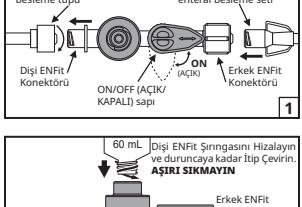

2 ***60mL ENFit uçlu irrigasyon şırıngası/Lavaj ve sıvı ilaç verme prosedürü. ENFit portları, tam dişli her boyuttaki ENFit merkez uçlu şırıngayı barındırabilir.***

Bir güvenlik özelliği olarak yeni ***ACE Connector*** sadece ENFit uç enteral irigasyon şırıngalarını kabul eder ve kateter uç şırıngaları, Luer uç şırıngaları, Luer uç uygulama seti veya hipodermik iğneleri kabul etmez.

a. Sapı KAPALI pozisyonuna getirin.
b. ***ACE Connector*** ürününü sıkıca tutarken ENFit dişi uç şırıngayı Auto-Seal Şırınga İlaç Portuyla Hizalayıp Duruncaya kadar İtin ve Çevirin. - **AŞIRI SIKMAYIN!** Kullanımdan önce ve sonra sıvı geçirmek kuvvetle önerilir.
c. Sıvı veya ilacı ***ACE Connector*** kısmının auto-seal şırınga ilaç portuna verin veya tercih edilirse gastrik kalıntıları geri çekin.
d. Şırıngayı çıkarın. Erkek ENFit Konektörü arayüzlü Auto-Seal Şırınga İlaç Portu otomatik olarak mühürlenir.
e. Artık herhangi bir ilaç kalıntısı gelmeyinceye kadar Auto-Seal Şırınga İlaç Portundan su geçirin.
f. Sapı ON (AÇIK) duruma getirin.



Bu ürün ENFit kademeli geçiş konektörü ve ENFit huni konektörleriyle uyumludur.

3 ***Drenaj ve Aspirasyon İşlemi***

ACE 485 Enteral Konektör özel donatımlı ENFit Salem Sump tüpleri ve özel ENFit adaptörlü Aspirasyon tüpleriyle aspirasyon ve drenaj için kullanılabilir.

4 ***MR Koşullu MR Klinik olmayan testler Dale Medical 485 ENFit ACE CONNECTOR cihazının MR Koşullu olduğunu göstermiştir. Bu cihazın bulunduğu bir hasta yerleştirmeden hemen sonra şu koşullar altında bir MR sisteminde güvenle taranabilir:***

- Statik manyetik alan sadece 1,5 Tesla ve 3 Tesla.
- Maksimum uzaysal gradiyent manyetik alan 3000 Gauss/cm veya altı.

Tek hastada kullanılmak üzeredir / Serin ve kuru bir yerde saklayın

A.B.D. federal kanunlarına göre bu cihaz sadece bir doktor tarafından veya emriyle satılabilir.

- Hastayı hareket ettirmek için sapı KAPALI pozisyona getirin ve besleme setini ayırın. Hasta sonra istenen şekilde hareket edebilir. Besleme yukarıdaki işlemler tekrarlanarak tekrar başlatılabilir. ***ACE Connector*** kabul edilen tıbbi standartlara göre kateterin bir parçası olarak kalır.
- Hastane protokolü uyarınca gerektikçe değiştirin. 30 günden fazla kullanılması önerilmez.
- Cihazın talimata göre veya beklendiği şekilde davranmaması durumunda ***ACE Connector*** cihazından talimata göre iyice sıvı geçirin ve enteral iletim kurulumunu kontrol edin. Problem devam ederse, gerektiği şekilde yeni bir ***ACE Connector*** ve enteral iletme setiyle değiştirin ve hastanenin "enteral besleme yönetimi" protokolünü izleyin.
- ***ACE Connector*** temel olarak enteral besleme için bir iletim yöntemi sağlar. İlaçları iletirken hastane veya tesisin enteral besleme yönetimi protokolünü izleyin.

Dale tıbbi ürünleri tercih ettiğiniz hastane/tıbbi malzeme bayisinden elde edilebilir.
Patent www.dalemed.com/patents

Sipariş Bilgisi

485 Dale ACE Connector
Ayrı olarak paketlenmiştir
50 adetlik kutularda satılır.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, A.B.D.
T: 508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP
Doğal kauçuk lateksle yapılmamıştır

Çin malı

Dale & ACE Connector, Dale Medical Products, Inc. şirketinin ABD, AB ve İngiltere'deki tescilli ticari markalarıdır.
ENFit GEDSA'nın tescilli ticari markasıdır ve GEDSA'nın izni ile kullanılmaktadır.
Salem Sump, Cardinal Health, Inc. şirketinin ticari markasıdır.
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products