Dale
Medical Products

Držák Nosního Obvazu

Pokyny k Použití




1. Vystřeďte plastovou část držáku přes nosní obvaz a pod nosem. Zajistěte umístěním ušních smyček okolo pacientových uší.


2. Úprava velikosti (od uší k nosu)



a. Zdvihněte konec pásku a přemístěte sestavu ušní smyčky na požadovanou délku.Opakujte na druhé straně.

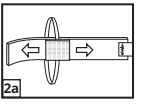

b. Ohněte konec pásky přes sestavu ušní smyčky. Přesahující materiál pásky můžete odstřihnout nůžkami.

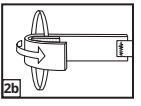

Výměna Obvazu

Při výměně nosního obvazu odstraňte jednu ušní smyčku, vyměňte obvaz a znovu nasaďte ušní smyčku kolem pacientova ucha.

K použití pouze u jednoho pacienta. Na jedno použití.

Video s ukázkou aplikace najdete na webu www.dalemed.com

Zdravotnické výrobky Dale dostanete u svého preferovaného nemocničního/zdravotnického dealera.

Vyrobeno bez použití přírodního latexu.

Dale er et registrert varemerke for Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannia.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942170 REV E

©Copyright 2024