Dale
Medical Products

Holder til Næseforbinding

Brugsanvisning

1. Centrer holderens plastikdel over næseforbindingen og under næsen.Fastgør den ved at sætte løkkerne rundt om patientens ører.





2. Justering af størrelse (øre til næse)

a. Løft remmens ende og flyt løkken, så holderen får den ønskede længde. Gør det samme i den anden side.



b. Buk enden af remmen ind over løkken. Overskydende rem kan klippes af.

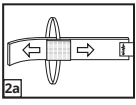

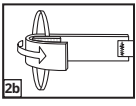

Forbindingsskift

Skift næseforbindingen ved at tage den ene løkke af det ene øre, skifte forbindingen og sætte løkken om patientens øre igen.

Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug.

Der ligger en video, der viser anbringelsen, på www.dalemed.com

Medicinske produkter fra Dale kan fås hos forhandlere af hospitalsudstyr/medicinsk udstyr.

Fremstillet uden naturgummilatex.

Dale er et registreret varemærke tilhørende Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannien.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942170 REV E

©Copyright 2024