Dale
Medical Products

Houder Voor Neusverband

Instructies voor het Aanbrengen




1. Plaats het plastic deel van de houder over het neusverband en onder de neus.
Maak de houder vast door de oorlussen om de oren van de patiënt te doen.




2. Verstellen
(oor tot neus)

a. Til het uiteinde van het bandje op en verplaats de oorlus tot de gewenste lengte. Ga op dezelfde manier te werk aan de andere kant.

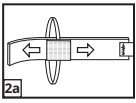

b. Vouw het uiteinde van het bandje over de oorlus. Extra bandlengte kan met een schaar worden afgeknipt.

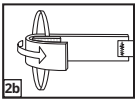

Het verband vervangen

Vervang het neusverband door een van de oorlussen te verwijderen, het verband te verversen en de oorlus opnieuw om het oor van de patiënt te doen.

Voor gebruik bij één patiënt. Disposable.

Een video over het gebruik van het product is te vinden op www.dalemed.com

De medische producten van Dale zijn verkrijgbaar bij uw voorkeursleverancier van ziekenhuis-/medische benodigdheden.

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.

Dale is een gedeponeerd handelsmerk van Dale Medical Products, Inc. in de VS, EU en VK.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942170 REV E

©Copyright 2024