Dale
Medical Products

Nenäsiteen Pidin

Käyttöohjeet

1. Keskitä pitimen muoviosa nenäsiteen päälle nenän alle. Kiinnitä asettamalla korvalenkit potilaan korvien taakse.





2. Koon säätö (korvasta nenään)

a. Nosta hihnan pää ylös ja aseta korvalenkki sopivan pituiseksi.Toista sama toisella puolella.



b. Taita hihnan pää korvalenkin päälle. Ylimääräinen hihna voidaan leikata pois saksilla.

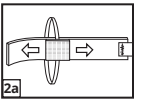

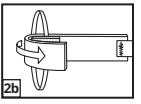

Sidoksen Vaihtaminen

Kun nenäside halutaan vaihtaa, irrota toinen korvalenkki, vaihda side ja aseta korvalenkki takaisin potilaan korvan ympäri.

Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.

Kiinnityksessä opastava video on katsottavissa osoitteessa www.dalemed.com.

Dalen lääketieteellisiä tuotteita on saatavana lääketieteellisten ja sairaalatarvikkeiden myyjiltä.

Ei ole valmistettu luonnonkumilateksista.

Dale on Dale Medical Products, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942170 REV E

©Copyright 2024