Dale
Medical Products

Support de Pansement Nasal

Instructions pour l'Application




1. Centrez la section en plastique du support sur le pansement nasal, en dessous du nez. Maintenez en place à l'aide de boucles que vous accrocherez autour des oreilles du patient.




2. Pour régler la taille (de l'oreille au nez)

a. Relevez l'extrémité de la bande et repositionnez la boucle à accrocher autour de l'oreille à la longueur désirée. Répétez l'opération de l'autre côté.

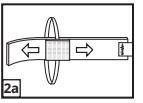

b. Repliez l'extrémité par-dessus la boucle à accrocher autour de l'oreille. L'excès de matériau peut être coupé à l'aide de ciseaux.

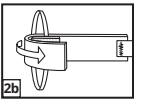

Pour changer le pansement

Pour changer le pansement nasal, retirez l'une des boucles accrochée à une oreille, changez le pansement et replacez la boucle autour de l'oreille du patient.

Usage réservé à une seule patiente. Jetable après usage.

Pour une vidéo sur l'application, veuillez vous rendre sur le site www.dalemed.com

Les produits médicaux Dale sont disponibles auprès de votre négociant en fournitures hospitalières/médicales.

Ce produit n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

Dale est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942170 REV E

©Copyright 2024