Dale
Medical Products

Halter für Nasenverband


Anwendung




1. Den Kunststoffteil des Halters über dem Nasenverband und unter der Nase zentrieren. Durch Platzieren der Ohrschlaufen hinter den Ohren des Patienten befestigen.



2. Zum Anpassen der Größe (zwischen Ohr und Nase)

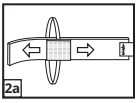

a. Das Ende des Bandes anheben und die Ohrschlaufe in der gewünschten Länge neu positionieren. Auf der anderen Seite wiederholen.

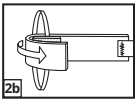

b. Das Ende des Bandes über die Ohrschlaufe falten. Überschüssiges Bandmaterial kann mit einer Schere abgeschnitten werden.

Verbandswechsel

Zum Wechseln des Nasenverbands eine Ohrschlaufe abnehmen, den Verband wechseln und die Ohrschlaufe wieder hinter dem Ohr des Patienten befestigen.

Nur für den Gebrauch an einem Patienten bestimmt. Einwegprodukt.

Ein Video der Anwendung finden Sie unter www.dalemed.com

Medizinische Produkte von Dale erhalten Sie von Ihrem bevorzugten Lieferanten für Krankenhausbedarf und medizinische Produkte.

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Dale ist eine eingetragene Marke von Dale Medical Products, Inc. in den USA, der EU und Großbritannien.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942170 REV E

©Copyright 2024