Dale
Medical Products

# Orrkötéstartó Szalag


## Alkalmazási Utasítások




**1.** Tegye a tartószalag műanyag részét középre az orrkötés fölé és az orr alá. A fülhurkoknak a beteg füle köré helyezésével rögzítse a tartószalagot.




**2.** A (fül és az orr közötti) méret beállítása

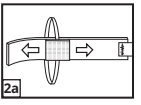


**a.** Emelje fel a pánt végét, majd állítsa be a fülhurokegységet a kívánt hosszra. Ismételje meg ugyanezt a másik oldalon.

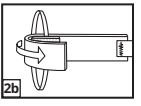


**b.** Hajtsa a pánt végét a fülhurokegység fölé. A fölösleges pántrészt olló val el lehet távolítani.

## A Kötés Cseréje

Az orrkötés cseréjéhez vegye le az egyik fülhurkot, cserélje ki a kötést, majd tegye vissza a fülhurkot a beteg füle köré.

Egyetlen betegen való alkalmazásra. Eldobható.

Az alkalmazást bemutató videóért látogasson el a www.dalemed.com webhelyre.

A Dale gyógyászati termékek elérhetők a kedvelt kórházi-/gyógyászatieszköz-forgalmazójától.

Nem természetes latex gumiból készült.

A Dale a Dale Medical Products, Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban, az EU-ban és az Egyesült Királyságban.

PHT NON-DEHP DEHP

**Dale Medical Products, Inc.**
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942170 REV E

©Copyright 2024