Dale
Medical Products

鼻用ドレッシング材ホルダー

使用方法




1. ホルダーのプラスチック部が鼻用ドレッシング材の中央、鼻の下に来るようにします。ループ部を患者の両耳にかけて固定します。


2. (耳から鼻の間の) サイズ調整の方法



a. ストラップの端を持ち上げ、耳用ループ部をストラップに沿って適切な位置になるよう調整します。反対側も同様に調整します。

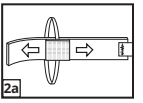

b. ストラップの端を耳用ループ部の上で折り曲げます。余分のストラップはハサミで切り取っても構いません。

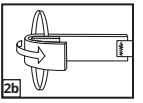

ドレッシング材の交換方法

鼻用ドレッシング材を交換するには、耳用ループの片側を外し、ドレッシング材を交換した後に、再度ループを患者の耳にかけます。

一人の患者のみに使用。使い捨て用。

取扱説明ビデオは、www.dalemed.comでご覧になれます。

Dale医療用品は優先病院・医療用品ディーラーよりお求めください。

天然ゴムラテックスは含まれていません。

DaleはDale Medical Products, Inc.の米国、EU、英国における登録商標です。

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle・Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942170 REV E

©Copyright 2024