Dale
Medical Products

Soporte para Apósito Nasal


Instrucciones de Aplicación




1. Centre la parte de plástico del soporte sobre el apósito, debajo de la nariz. Coloque los agarres alrededor de las orejas del paciente para fijar el dispositivo en su lugar.



2. Para ajustar el tamaño (oreja a nariz)

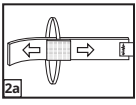

a. Levante el extremo de la banda y vuelva a colocar el agarre a la longitud deseada. Repita el procedimiento en el otro lado.

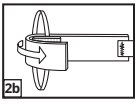

b. Pliegue el extremo de la banda sobre el agarre auricular. El material excedente de la banda se puede cortar con tijeras.

Cambio de Apósitos

Para cambiar el apósito nasal, retire un agarre auricular, cambie el apósito, y vuelva a colocar el agarre alrededor de la oreja del paciente.

Para utilizar en una sola paciente. Desechable.

Para ver un vídeo sobre cómo utilizar el producto, visita www.dalemed.com

Los productos médicos Dale están disponibles con su distribuidor preferido de productos para hospitales o médicos.

Fabricado sin látex de goma natural.

Dale es una marca registrada de Dale Medical Products, Inc. en EE.UU., la UE y el Reino Unido.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942170 REV E

©Copyright 2024