Dale
Medical Products

Näsförbandshållare

Appliceringsanvisningar




1. Centrera hållarens plastdel över näsförbandet och under näsan. Fäst hållaren genom att placera öronbandsöglorna runt patientens öron.




2. Justera storleken (öra till näsa)

a. Lyft remmens ände och flytta om öronbandsöglan så att längden blir den önskade. Gör likadant på andra sidan.

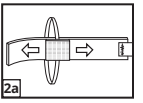

b. Vik remmens ände över öronbandsöglan. Överflödig remlängd kan klippas av med sax.

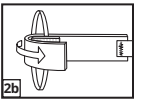

Byta Förband

För att byta näsförbandet, ta av ena öronbandsöglan, byt förbandet och sätt tillbaka öronbandsöglan runt patientens öra.

För användning till en enstaka patient. Engångsprodukt

För att se en appliceringsvideo, gå till www.dalemed.com

Dale medicinska produkter fås från er försäljare av sjukhus-/medicinska produkter.

Ej tillverkad med naturgummilatex.

Dale är ett registrerat varumärke som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA, EU och Storbritannien

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942170 REV E

©Copyright 2024