Dale
Medical Products

# เครื่องพันผ้าปิดแผลรอบจมูก


## วิธีการใช้งาน




**1.** จัดตำแหน่งส่วนที่เป็นพลาสติกของเครื่องพันผ้าปิดแผลให้อยู่ตรงกึ่งกลางและอยู่ด้านบนของผ้าปิดแผลและอยู่ด้านล่างของจมูก พันรอบใบหูของผู้ป่วยให้แน่น




**2.** วิธีการปรับขนาด
(จากหูถึงจมูก)

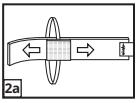


**a.** ยกด้านปลายของสายและจัดตำแหน่งส่วนประกอบรอบหูใหม่โดยให้มีความยาวตามต้องการ ทำซ้ำเหมือนกันสำหรับอีกข้างหนึ่ง

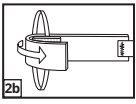


**b.** พับด้านปลายของสายอ้อมส่วนประกอบรอบหู ใช้กรรไกรตัดวัสดุของสายที่ยาวเกินไปออก

## การเปลี่ยนผ้าปิดแผล

**เปลี่ยนผ้าปิดแผลจมูก โดยการถอดสายรอบหูออก แล้วเปลี่ยนผ้าปิดแผล จากนั้นให้นำสายรอบหูอันใหม่มาพันอ้อมหูของผู้ป่วย**

สำหรับผู้ป่วยใช้ครั้งเดียว ใช้แล้วทิ้ง

สำหรับวิดีโอแสดงวิธีการใช้ กรุณาไปที่ www.dalemed.com

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ Dale มีบริการจากโรงพยาบาล/ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ท่านชื่นชอบ

ไม่ได้ทำจากยางลาเท็กซ์ธรรมชาติ

Dale เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร

PHT NON-DEHP DEHP

**Dale Medical Products, Inc.**
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
โทรศัพท์: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942170 REV E

©Copyright 2024