
Dale
Medical Products

Nazal Pansuman Tutucu


Uygulama Talimatı




1. Tutucunun plastik kısmını nazal pansuman üzerinde ve burun altında ortalayın. Kulak halkalarını hastanın kulakları etrafına yerleştirerek sabitleyin.

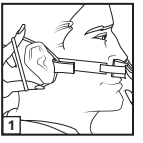

2. Büyüklüğü (kulak-burun) ayarlamak için

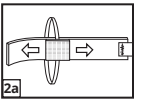

a. Şeridin ucunu kaldırın ve kulak halkası tertibatını istenen uzunlukta tekrar konumlandırın. Diğer taraf için de tekrarlayın.

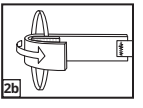

b. Şeridin ucunu kulak halkası tertibatı üzerinden katlayın. Fazla şerit malzemesini makasla kesip çıkarabilirsiniz.

Pansumanı Değiştirmek İçin

Nazal pansumanı değiştirmek için bir kulak halkasını çıkarın, pansumanı değiştirin ve kulak halkasını tekrar hastanın kulağının etrafına yerleştirin.

Tek hastada kullanılmak üzeredir. Tek kullanımlıktır

Uygulama videosu için lütfen www.dalemed.com web sitesine gidiniz.

Dale tıbbi ürünleri tercih ettiğiniz hastane/tıbbi malzeme tedarikçilerinden sağlanabilir.

Doğal kauçuk lateksten üretilmemiştir.

Dale, Dale Medical Products, Inc. şirketinin ABD, AB ve İngiltere'de tescilli ticari markasıdır.

PHT
NON-DEHP
DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942170 REV E

©Copyright 2024