
Dale
Medical Products


Držák Snímačů


Pokyny k Použití

1. Umístěte držák podél flebostatické osy (uprostřed hrudníku) a oviňte kolem pacientovy paže. Přitiskněte k sobě oba povrchy suchého zipu.

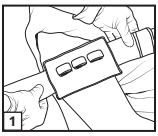

2. Otevřete potřebné chlopně se suchým zipem, provlékněte očky na snímačích a přitisknutím zajistěte.

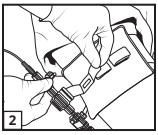

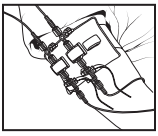

K použití pouze u jednoho pacienta. Na jedno použití.

Video s ukázkou aplikace najdete na webu www.dalemed.com

Zdravotnické výrobky Dale dostanete u svého preferovaného nemocničního/zdravotnického dealera.

Vyrobeno bez použití přírodního latexu.

Dale er et registrert varemerke for Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannia.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942150 REV E

©Copyright 2024