
Dale
Medical Products


Transducerhouder


Instructies voor het Aanbrengen

1. Plaats de houder ter hoogte van het rechteratrium (midden van de borst) en wikkel hem om de arm van de patiënt. Druk de klittenbandsluiting aan om deze vast te zetten.

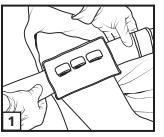

2. Open de nodige klittenbandlipjes, steek ze door de gleuf/gleuven van de transducer(s) en druk ze aan om ze vast te zetten.

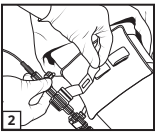

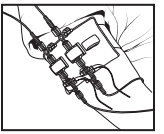

Voor gebruik bij één patiënt. Disposable.

Een video over het gebruik van het product is te vinden op www.dalemed.com

De medische producten van Dale zijn verkrijgbaar bij uw voorkeursleverancier van ziekenhuis-/medische benodigdheden.

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.

Dale is een gedeponeerd handelsmerk van Dale Medical Products, Inc. in de VS, EU en VK.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942150 REV E

©Copyright 2024