
Dale
Medical Products


Support de Transducteurs


Instructions pour l'Application

1. Placer le support le long de l'axe phlébostatique (mi-thorax), et l'enrouler autour du bras du patient. Appuyer sur la fermeture auto-agrippante pour sécuriser.

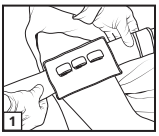

2. Ouvrir les languettes nécessaires de la fermeture auto-agrippante, puis les faire passer par la(les) fente(s) du(des) transducteur(s). Appuyer pour sécuriser.

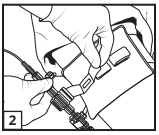

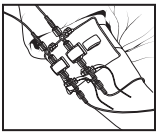

Usage réservé à une seule patiente. Jetable après usage.

Pour une vidéo sur l'application, veuillez vous rendre sur le site www.dalemed.com

Les produits médicaux Dale sont disponibles auprès de votre négociant en fournitures hospitalières/médicales.

Ce produit n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

Dale est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942150 REV E

©Copyright 2024