
Dale
Medical Products


Transducer-Halter


Anwendung

1. Halter am hydrostatischen Nullpunkt (Vorhofniveau) positionieren und um den Arm des Patienten wickeln. Klettverschluss zusammendrücken und schließen.

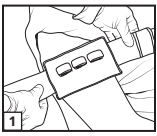

2. Klettverschlüsse nach Bedarf öffnen und durch die Schlitze der Transducer fädeln. Zusammendrücken und schließen.

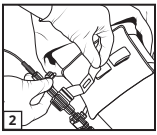

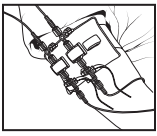

Nur für den Gebrauch an einem Patienten bestimmt. Einwegprodukt.

Ein Video der Anwendung finden Sie unter www.dalemed.com

Medizinische Produkte von Dale erhalten Sie von Ihrem bevorzugten Lieferanten für Krankenhausbedarf und medizinische Produkte.

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Dale ist eine eingetragene Marke von Dale Medical Products, Inc. in den USA, der EU und Großbritannien.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CE

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

942150 REV E
©Copyright 2024