

Dale
Medical Products

Υποδοχή μορφομετατροπέα


Οδηγίες εφαρμογής

1. Τοποθετήστε την υποδοχή στο ύψος του φλεβοστατικού άξονα (στη μεσότητα του στήθους) και τυλίξτε την γύρω από τον βραχίονα του ασθενούς. Πιέστε τις αυτόδετες ταινίες για να ασφαλίσετε την υποδοχή.

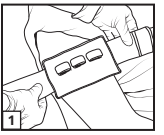

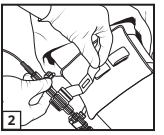

2. Ανοίξτε τα αυτόδετα στοιχεία που χρειάζεστε, περάστε τα μέσα από τις εγκοπές των μορφομετατροπέων και πιέστε τα για να ασφαλίσετε τους μορφομετατροπείς.

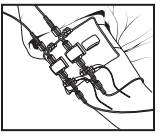

Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Αναλώσιμο

Βίντεο επίδειξης της τεχνικής εφαρμογής θα βρείτε στον ιστότοπο www.dalemed.com

Τα ιατρικά προϊόντα της Dale διατίθενται από τους αντιπροσώπους νοσοκομειακών/ιατρικών προϊόντων με τους οποίους συνεργάζεστε.

Δεν κατασκευάζεται από φυσικό λατέξ.

Το Dale είναι σήμα κατατεθέν της Dale Medical Products, Inc. στις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942150 REV E

©Copyright 2024