
Dale
Medical Products


Jelátalakító-tartó


Alkalmazási Utasítások

1. A tartót a phlebostatikus tengely (mellközép) mentén helyezze el, majd hajtsa a beteg karja köré. A rögzítéséhez nyomja rá a tépőzárat.

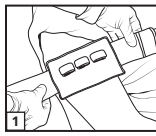

2. Nyissa fel a szükséges tépőzáras füleket, vezesse át a jelátalakító(k) nyílásán(-ain), majd a rögzítéshez nyomja le a füleket.

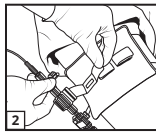

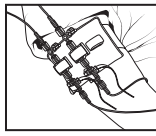

Egyetlen betegen való alkalmazásra. Eldobható.

Az alkalmazást bemutató videóért látogasson el a www.dalemed.com webhelyre.

A Dale gyógyászati termékek elérhetők a kedvelt kórházi-/gyógyászatieszköz-forgalmazójától.

Nem természetes latex gumiból készült.

A Dale a Dale Medical Products, Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban, az EU-ban és az Egyesült Királyságban.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942150 REV E

©Copyright 2024