

Dale
Medical Products


トランスデューサ・ホルダー

使用方法

1. ホルダーを静脈静止軸（胸部中央）に沿って、患者の腕に巻きつけます。面ファスナーを押して固定させます。
2. 必要な面ファスナーのタブを開き、トランスデューサのスロットに通し、押さえて固定します。

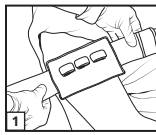

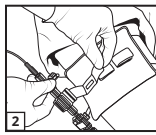

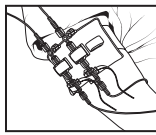

一人の患者のみに使用。使い捨て用。

取扱説明ビデオは、www.dalemed.comでご覧になれます。

Dale医療用品は優先病院・医療用品ディーラーよりお求めください。

天然ゴムラテックスは含まれていません。

DaleはDale Medical Products, Inc.の米国、EU、英国における登録商標です。

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle・Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942150 REV E

©Copyright 2024