
Dale
Medical Products


트랜스듀서 홀더


착용 방법

1. 홀더를 우심방축(흉부 중앙)을 따라 위치시키고 환자의 팔을 감싸십시오. 후크 및 루프 클로저를 눌러 고정시키십시오.

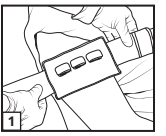

2. 필요한 후크 및 루프 탭을 열고, 트랜스듀서(들)의 가느다란 구멍(들)을 빠져나가 눌러 고정시키십시오.

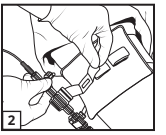

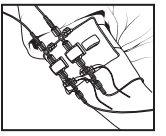

단일 환자용. 1회용

도포 시연 영상을 보시려면, www.dalemed.com을 방문하십시오.

Dale 의료 제품들은 이용하시는 병원/의료용품 공급상으로부터 구입하실 수 있습니다.

천연 고무 라텍스로 제조되지 않음.

Dale은 미국, EU 및 영국에서 Dale Medical Products, Inc.의 등록 상표입니다.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, 미국
전화: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942150 REV E

©Copyright 2024