
Dale
Medical Products


# Suporte para Transdutores


## Instruções de Aplicação

**1.** Posicione o Suporte ao longo do eixo flebostático (linha axilar) e envolva em torno do braço do doente. Pressione o fixador de gancho-e-argola para fixar.

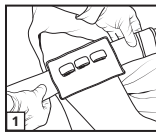


**2.** Abra as abas de gancho-e-argola necessárias, passe através da(s) aberturas(s) do(s) transdutor(es) e pressione para fixar.

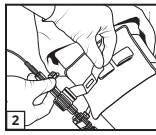

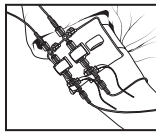Para a utilização numa única doente. Descartável

Para ver um vídeo sobre a aplicação, aceda www.dalemed.com

Os produtos médicos da Dale encontram-se disponíveis no revendedor de materiais hospitalares/médicos da sua preferência.

Não fabricado com látex de borracha natural.

Dale é uma marca registada da Dale Medical Products, Inc. nos EUA, UE e Reino Unido

PHT NON-DEHP DEHP

**Dale Medical Products, Inc.**
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942150 REV E

©Copyright 2024