

Dale
Medical Products

Givarhållare


Appliceringsanvisningar

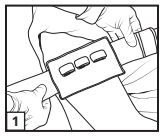

1. Placera hållaren i nivå med höger förmak (mitt för bröstet) och linda den runt patientens arm. Tryck ihop kardborreremmen för att fästa hållaren.

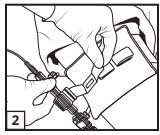

2. Öppna de kardborrefästen som behövs, trä dem igenom slitsen(-arna) på givaren(-arna) och tryck fast dem.

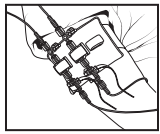

För användning till en enstaka patient. Engångsprodukt

För att se en appliceringsvideo, gå till www.dalemed.com

Dale medicinska produkter fås från er försäljare av sjukhus-/medicinska produkter.

Ej tillverkad med naturgummilatex.

Dale är ett registrerat varumärke som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA, EU och Storbritannien

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942150 REV E

©Copyright 2024