
Dale®
Medical Products


ตัวยึดอุปกรณ์แปลงสัญญาณ


วิธีการใช้งาน

1. จัดวางตัวยึดอุปกรณ์กับศูนย์ของผู้ป่วย (ระดับกึ่งกลางทรวงอก) และพันรอบ ๆ แขนผู้ป่วย กดเทป Hook & Loop เข้าหากันเพื่อยึดให้แน่น

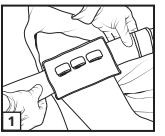

2. แกะสายรัดเทป Hook & Loop หากจำเป็น สอดเส้นไหมผ่านช่องของอุปกรณ์แปลงสัญญาณ และกดให้แน่น

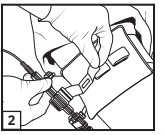

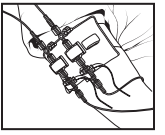

สำหรับผู้ป่วยใช้ครั้งเดียว ใช้แล้วทิ้ง

สำหรับวิดีโอแสดงวิธีการใช้ กรุณาไปที่ www.dalemed.com

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ Dale มีบริการจากโรงพยาบาล/ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ท่านชื่นชอบ

ไม่ได้ทำจากยางลาเท็กซ์ธรรมชาติ

Dale เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
โทรศัพท์: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942150 REV E

©Copyright 2024