

Dale
Medical Products


Transducer Holder

Uygulama Talimatı

1. Tutucuyu flebostatik eksen (göğüs ortası) hizasında konumlandırın ve hastanın kolunun çevresine sarın. Sabitlemek için yapışkan kanca ve halka tutturucuya bastırın.
2. Gerekli yapışkan kanca ve halka tutturucu bantları açın, transdüserin/transdüserlerin yuvası/yuvaları içinden geçirin ve bastırarak sabitleyin.

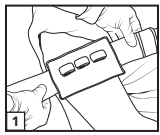

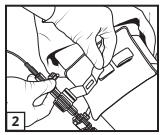

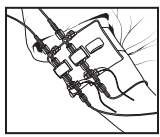

Tek hastada kullanılmak üzeredir. Tek kullanımlıktır

Uygulama videosu için lütfen www.dalemed.com web sitesine gidiniz.

Dale tıbbi ürünleri tercih ettiğiniz hastane/tıbbi malzeme tedarikçilerinden sağlanabilir.

Doğal kauçuk lateksten üretilmemiştir.

Dale, Dale Medical Products, Inc. şirketinin ABD, AB ve İngiltere'de tescilli ticari markasıdır.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942150 REV E

©Copyright 2024