
Dale
Medical Products

Ohebná Dlaha na Ruku


Pokyny k Použití

1. Srovnejte zápěstí s dlahou a ohněte ji do požadované polohy.
2. Omotejte pásky kolem ruky a dlahy na požadované napětí. Připevněte stisknutím háčků suchého zipu.



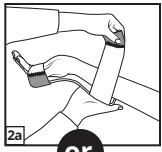

or

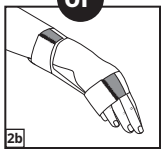

MR Podmíněně Bezpečné při MR

U výrobku Ohebná dlaha na ruku Dale 650 (velká) bylo zjištěno, že je podmíněně bezpečný při MR.

Zjištění výsledků MR u výrobku Dlaha na ruku Dale 650 platí i pro menší verze dlahy (651, 652 a 653) vyrobené ze stejných materiálů.

Neklinické testování prokázalo, že výrobek Ohebná dlaha na ruku Dale 650 velká je podmíněně bezpečný při MR. Pacient s tímto přístrojem může být bezpečně snímkován ihned po splnění specifických podmínek.

K použití pouze u jednoho pacienta. Na jedno použití.

Video s ukázkou aplikace najdete na webu www.dalemed.com

Zdravotnické výrobky Dale dostanete u svého preferovaného nemocničního/zdravotnického dealera.

Vyrobeno bez použití přírodního latexu.

Dale er et registrert varemerke for Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannia.

PHT
NON-DEHP
DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942246 REV F

©Copyright 2024