
Dale
Medical Products

Fleksibel Armskinne


Brugsanvisning

1. Ret håndleddet ind med armskinnen og bøj armskinnen til den ønskede stilling.
2. Læg remmene rundt om hånden og skinnen, så skinnen sidder tilpas stramt. Luk med burrebåndet.



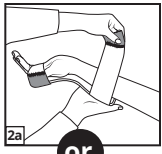

or

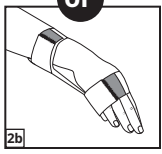

⚠ MR Conditional

(godkendt til MR-scanning under visse betingelser)

Det er blevet bestemt, at Dale fleksibel armskinne, nr. 650 stor, er MR Conditional.

Resultaterne af MR-scanningen af Dale 650 armskinnen gælder for de mindste modeller af armskinnen (nr. 651, nr. 652 og nr. 653), der er fremstillet af samme materiale.

Ikke-klinisk afprøvning påviste, at Dale fleksibel armskinne, nr. 650 stor, er MR Conditional. Patienter kan straks efter placering scannes sikkert med denne skinne under specifikke betingelser.

Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug.

Der ligger en video, der viser anbringelsen, på www.dalemed.com

Medicinske produkter fra Dale kan fås hos forhandlere af hospitalsudstyr/medicinsk udstyr.

Fremstillet uden naturgummilatex.

Dale er et registreret varemærke tilhørende Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannien.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942246 REV F

©Copyright 2024