
Dale®
Medical Products

Buigbare Armplank


Instructies voor het Aanbrengen

1. Plaats de pols op één lijn met de armplank uit en buig de armplank tot de gewenste stand.
2. Wikkel de bandjes om de hand en de plank en span ze naar wens aan. Druk de klittenbandsluiting aan om deze vast te zetten.



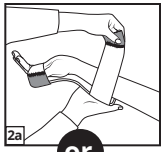

or

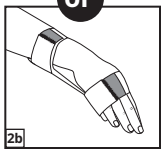

MRI-veilig onder bepaalde voorwaarden

De Dale buigbare armplank 650 Large is onder bepaalde voorwaarden MRI-veilig bevonden.

De bevindingen van de MRI-resultaten voor de Dale armplank 650 gelden voor de kleinere versies (651, 652 en 653) van de armplank, die van dezelfde materialen zijn vervaardigd.

Uit niet-klinische tests is gebleken dat de Dale buigbare armplank 650 Large onder bepaalde voorwaarden MRI-veilig is. Een patiënt met dit hulpmiddel kan onmiddellijk na plaatsing ervan veilig worden gescand onder specifieke voorwaarden.

Voor gebruik bij één patiënt. Disposable.

Een video over het gebruik van het product is te vinden op www.dalemed.com

De medische producten van Dale zijn verkrijgbaar bij uw voorkeursleverancier van ziekenhuis-/medische benodigdheden.

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.

Dale is een gedeponeerd handelsmerk van Dale Medical Products, Inc. in de VS, EU en VK.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942246 REV F

©Copyright 2024