Dale®
Medical Products


Taivutettava Käsituki

Käyttöohjeet


1. Kohdista ranne käsituen kanssa ja taivuta halutttuun asentoon.

2. Kääri hihnat käden ja tuen ympäri halutulle kireydelle. Kiinnitä painamalla tarranauhakiinnikkeet kiinni.



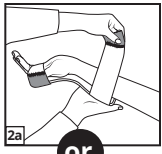

or

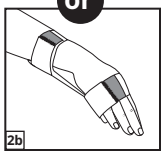

MR Ehdollisesti Turvallinen Magneettikuvauksessa

Dalen taivutettava käsituki, nro 650 suuri, on todettu ehdollisesti turvalliseksi magneettikuvauksessa.

Dale 650 -käsituella saadut magneettikuvaustulokset koskevat myös käsitukien pienempiä versioita (nro 651, 652 ja 653), jotka on valmistettu samoista materiaaleista.

Ei-kliinisissä testeissä on osoitettu, että Dalen taivutettava käsituki, nro 650 suuri, on ehdollisesti turvallinen magneettikuvauksessa. Potilasta, jolla on tämä laite, voidaan kuvata turvallisesti välittömästi asennuksen jälkeen tietyissä olosuhteissa.

Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.

Kiinnityksessä opastava video on katsottavissa osoitteessa www.dalemed.com.

Dalen lääketieteellisiä tuotteita on saatavana lääketieteellisten ja sairaalatarvikkeiden myyjiltä.

Ei ole valmistettu luonnonkumilateksista.

Dale on Dale Medical Products, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942246 REV F

©Copyright 2024