Dale®
Medical Products


Attelle Pliable

Instructions pour l'Application


1. Aligner le poignet sur l'attelle et plier selon la position désirée.

2. Enrouler les bandes autour de la main et de l'attelle selon la tension désirée. Appuyer sur la fermeture auto-agrippante pour maintenir en place.



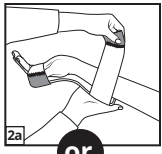

or

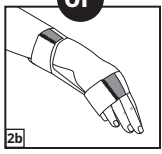

MRI Compatibilité Conditionnelle IRM

La compatibilité conditionnelle IRM du produit Attelle pliable Dale, N° 650 Large (grande taille) est avérée.

Les résultats IRM obtenus pour l'attelle Dale 650 s'appliquent aux attelles de plus petite taille (n° 651, 652 et 653) utilisant les mêmes matériaux.

Des essais non cliniques ont démontré la compatibilité conditionnelle IRM du produit Attelle pliable Dale, n° 650 Large (grande taille.) Un patient portant cet accessoire peut subir un examen IRM dès que des conditions spécifiques sont remplies.

Usage réservé à une seule patiente. Jetable après usage.

Pour une vidéo sur l'application, veuillez vous rendre sur le site www.dalemed.com

Les produits médicaux Dale sont disponibles auprès de votre négociant en fournitures hospitalières/médicales.

Ce produit n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

Dale est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942246 REV F

©Copyright 2024