
Dale
Medical Products

Biegsames Armpolster


Anwendung

1. Handgelenk mit dem Armpolster ausrichten und zusammen in die gewünschte Position biegen.
2. Riemen um die Hand und das Polster wickeln und nach Bedarf spannen. Klettverschluss zusammendrücken und sichern.



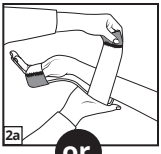

or

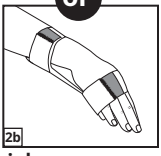

⚠ MR Bedingt MRT-sicher

Die bedingte MRT-Sicherheit des biegsamen Armpolsters von Dale (Nr. 650 – groß) wurde bestätigt.

Die Auswertung der MRT-Ergebnisse für das Armpolster 650 von Dale gilt für die kleineren Ausführungen (Nr. 651, 652 und 653), die aus denselben Materialien hergestellt werden.

Im Rahmen nicht-klinischer Tests konnte nachgewiesen werden, dass das biegsame Armpolster von Dale (Nr. 650 – groß) bedingt MRT-sicher ist. Ein Patient mit dieser Vorrichtung kann sofort nach deren Platzierung unter bestimmten Umständen sicher gescannt werden.

Nur für den Gebrauch an einem Patienten bestimmt. Einwegprodukt.

Ein Video der Anwendung finden Sie unter www.dalemed.com

Medizinische Produkte von Dale erhalten Sie von Ihrem bevorzugten Lieferanten für Krankenhausbedarf und medizinische Produkte.

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Dale ist eine eingetragene Marke von Dale Medical Products, Inc. in den USA, der EU und Großbritannien.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942246 REV F

©Copyright 2024