
Dale
Medical Products

Εύκαμπτο στήριγμα βραχίονα


Οδηγίες εφαρμογής

1. Ευθυγραμμίστε τον καρπό με το στήριγμα του βραχίονα και λυγίστε το στην επιθυμητή θέση.
2. Περιτυλίξτε τις ταινίες γύρω από το χέρι και το στήριγμα με το επιθυμητό σφίξιμο. Πιέστε τις επιφάνειες σύνδεσης του για να τις διασφαλίσετε.



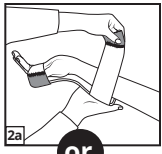

or

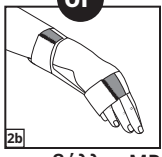

⚠ MRI Επηρεάζεται σε περιβάλλον MR

Το Εύκαμπτο Στήριγμα Βραχίονα της Dale #650 Μεγάλο καθορίστηκε ότι επηρεάζεται από περιβάλλον MR.

Τα ευρήματα από τα αποτελέσματα του MRI για το Στήριγμα Βραχίονα 650 της Dale ισχύουν για τα μικρά μεγέθη (#651, #652, και #653) των Στηριγμάτων Βραχίονα, που κατασκευάζονται από τα ίδια υλικά.

Μη κλινικές δοκιμές απέδειξαν ότι το Εύκαμπτο Στήριγμα Βραχίονα της Dale #650 Μεγάλο επηρεάζεται από περιβάλλον MR. Η σάρωση ενός ασθενούς με αυτήν τη συσκευή μπορεί να γίνει με ασφάλεια αμέσως μετά την τοποθέτησή της υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Αναλώσιμο

Βίντεο επίδειξης της τεχνικής εφαρμογής θα βρείτε στον ιστότοπο www.dalemed.com

Τα ιατρικά προϊόντα της Dale διατίθενται από τους αντιπροσώπους νοσοκομειακών/ιατρικών προϊόντων με τους οποίους συνεργάζεστε.

Δεν κατασκευάζεται από φυσικό λατέξ.

Το Dale είναι σήμα κατατεθέν της Dale Medical Products, Inc. στις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942246 REV F
©Copyright 2024