Dale
Medical Products


Hajlékony Kartartó Támla

Alkalmazási Utasítások


1. Igazítsa a csuklót a kartartó támlához, majd a támlát hajlítsa a kívánt pozícióba.

2. Hajtsa a pántokat a kéz és a tartótámla köré, a kívánt szorosságúra. Nyomja a tépőzárat a helyére az elhelyezés rögzítéséhez.



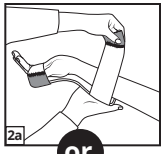

or

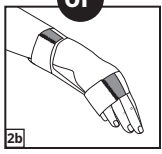

MR-környezetben Feltételesen Biztonságos

A 650-es termékszámú, nagy méretű Dale hajlékony kartartó támla MR-környezetben feltételesen biztonságosnak bizonyult.

A Dale 650-es kartartó támlára vonatkozó MR-tesztelési eredmények vonatkoznak a kartartó támla kisebb, ugyanazon anyagokból készült változataira is (651-es, 652-es és 653-as termékszámú változatok).

A nem klinikai környezetben lefolytatott tesztelés a 650-es termékszámú, nagy méretű Dale hajlékony kartartó támlát MR-környezetben feltételesen biztonságosnak mutatta ki. Az ezen eszközt viselő beteget az eszköz felhelyezése után közvetlenül biztonságosan alá lehet vetni mágneses rezonanciás vizsgálatnak bizonyos körülmények között.

Egyetlen betegen való alkalmazásra. Eldobható.

Az alkalmazást bemutató videóért látogasson el a www.dalemed.com webhelyre.

A Dale gyógyászati termékek elérhetők a kedvelt kórházi-/gyógyászatieszköz-forgalmazójától.

Nem természetes latex gumiból készült.

A Dale a Dale Medical Products, Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban, az EU-ban és az Egyesült Királyságban.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942246 REV F

©Copyright 2024