
Dale
Medical Products

ベンダブル アームボード


使用方法

1. アームボードと手首を合わせ、任意の角度に折り曲げます。
2. ストラップを手とボードに巻き、適切に締め付けます。面ファスナーを押して固定します。



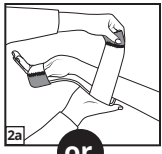

or

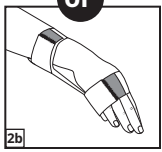

MRIMRでは条件付き

Dale社のベンダブル アームボード #650サイズ大は、条件付きでMR可能です。

Dale 650 アームボードのMRI結果の所見は、同じ材質で製造されたアームボードの小型版（#651、#652、#653）に適用されます。

非臨床試験では、Dale社のベンダブル アームボード #650大は、MRでは条件付です。本製品を装着した患者は、特定の条件の下、装着後直ぐ安全に検査を受けることができます。

一人の患者のみに使用。使い捨て用。

取扱説明ビデオは、www.dalemed.comでご覧になれます。

Dale医療用品は優先病院・医療用品ディーラーよりお求めください。

天然ゴムラテックスは含まれていません。

DaleはDale Medical Products, Inc.の米国、EU、英国における登録商標です。

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle・Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942246 REV F

©Copyright 2024