
Dale
Medical Products


벤더블 암보드

착용 방법


1. 손목을 암보드와 일렬이 되게 하고 원하는 위치로 구부리십시오.

2. 띠로 손과 보드를 원하는 만큼 팽팽하게 감으십시오. 후크 파스너를 눌러서 고정하십시오.

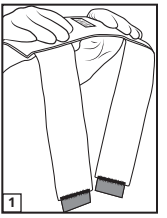

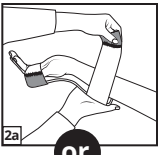

or

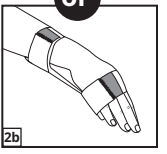

MR Conditional (자기 공명 노출 안전)
#650 대형 Dale 벤더블 암보드는 MR Conditional (자기 공명 노출 안전) 등급 판정을 받았습니다.

Dale 650 암보드에 대한 MRI 결과의 소견은 동일한 재료로 제조된, 소형 암보드(#651, #652 및 #653)에도 적용됩니다.

비임상 시험 결과 #650 대형 Dale 벤더블 암보드는 MR Conditional 등급이라는 것이 입증되었습니다. 이 기기를 착용한 환자는 특정 조건하에 놓여진 직후에 안전하게 MRI 촬영 검사를 받을 수 있습니다.

단일 환자용. 1회용

도포 시연 영상을 보시려면, www.dalemed.com을 방문하십시오.

Dale 의료 제품들은 이용하시는 병원/의료용품 공급상으로부터 구입하실 수 있습니다.

천연 고무 라텍스로 제조되지 않음.

Dale은 미국, EU 및 영국에서 Dale Medical Products, Inc.의 등록 상표입니다.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, 미국
전화: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942246 REV F

©Copyright 2024